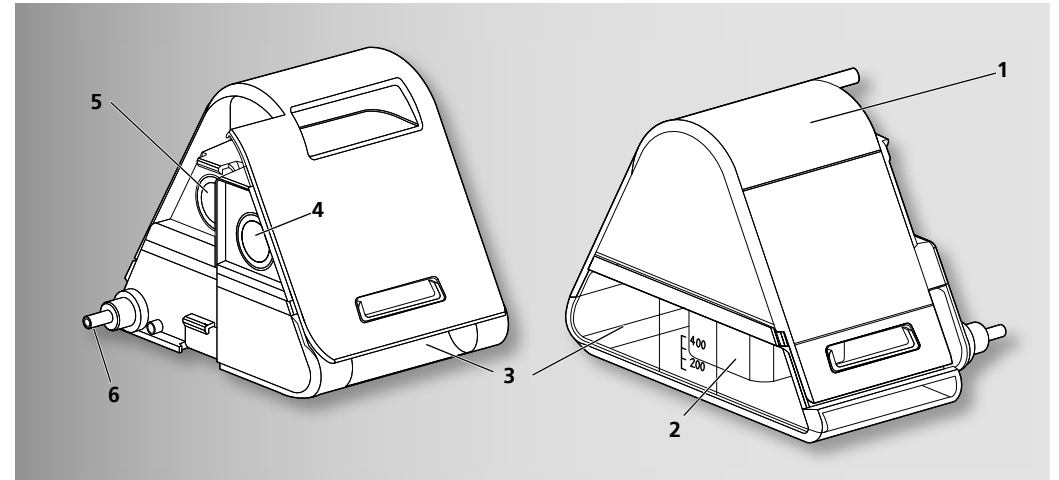


DE Gebrauchsanweisung **EN** Instructions for Use **FR** Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing **IT** Istruzioni d'uso **TR** Kullanma Kılavuzu
ES Manual de instrucciones **MK** Упатство за употреба **SR** Uputstvo za upotrebu
MS Arahan penggunaan **KO** 사용 설명서

WM 68250g 01/2026 DE, EN, FR, NL, IT, TR, ES-MX, MK, SR, MS, KO



CE 0197

**Löwenstein Medical Technology
GmbH + Co. KG**
Kronsaalweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.com

prismaAQUA

Humidifier

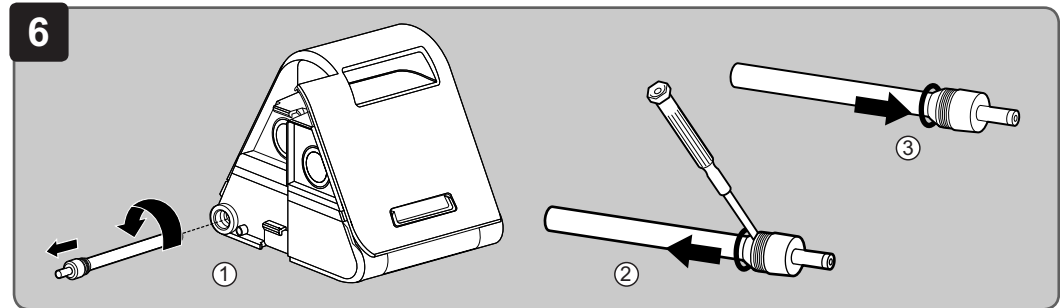
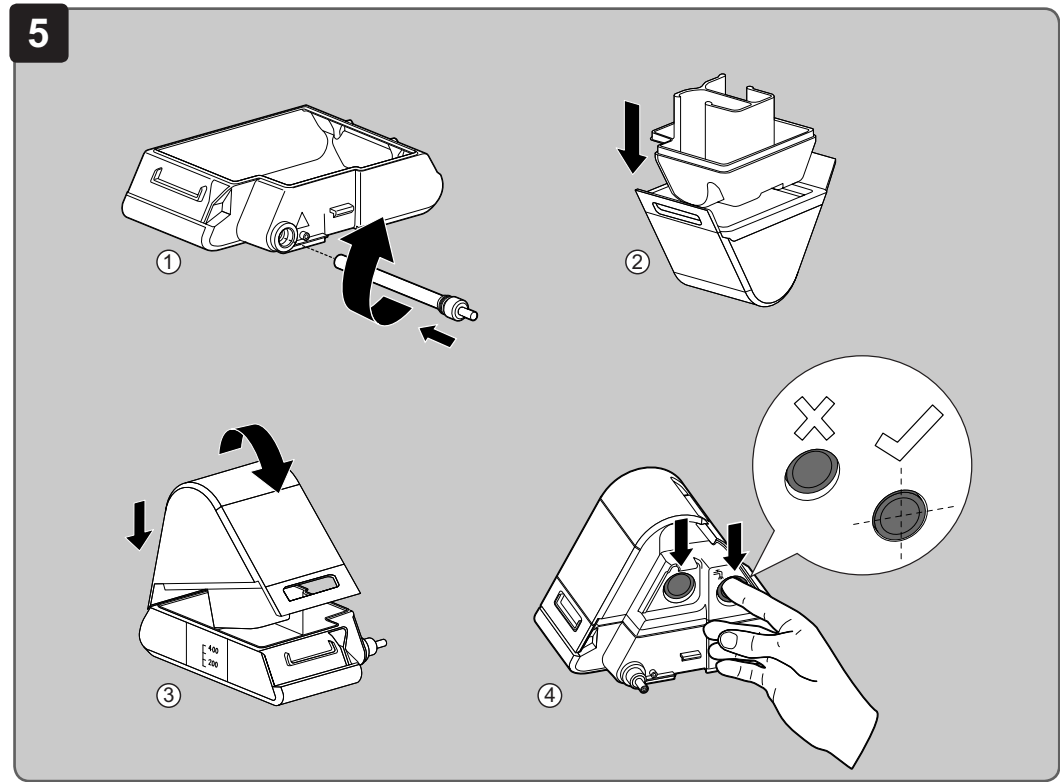
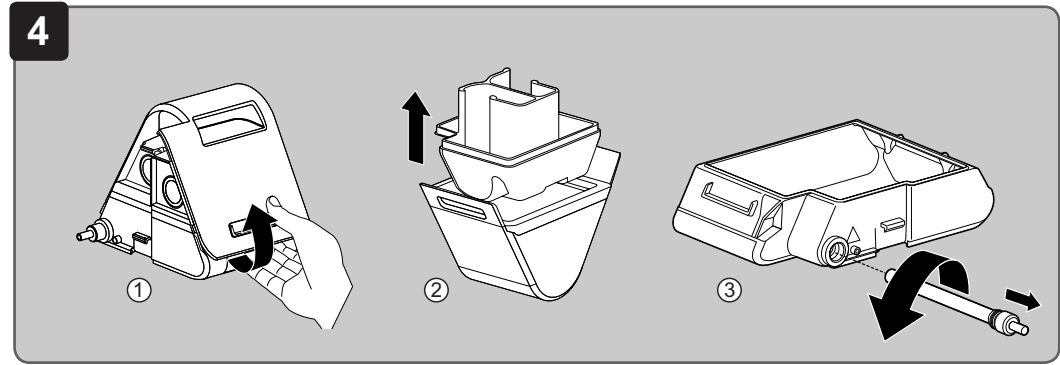
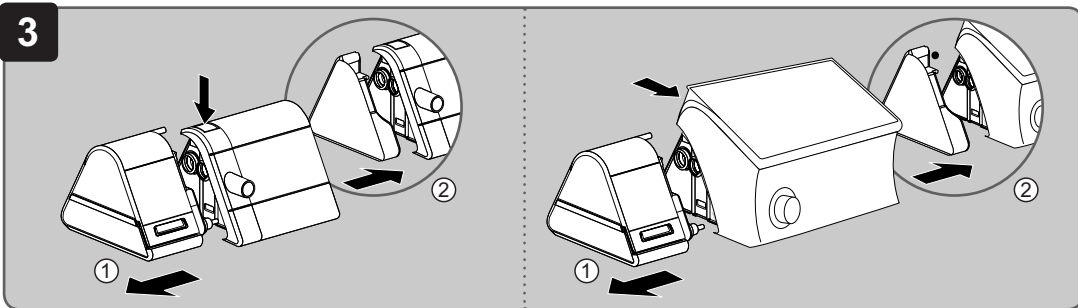
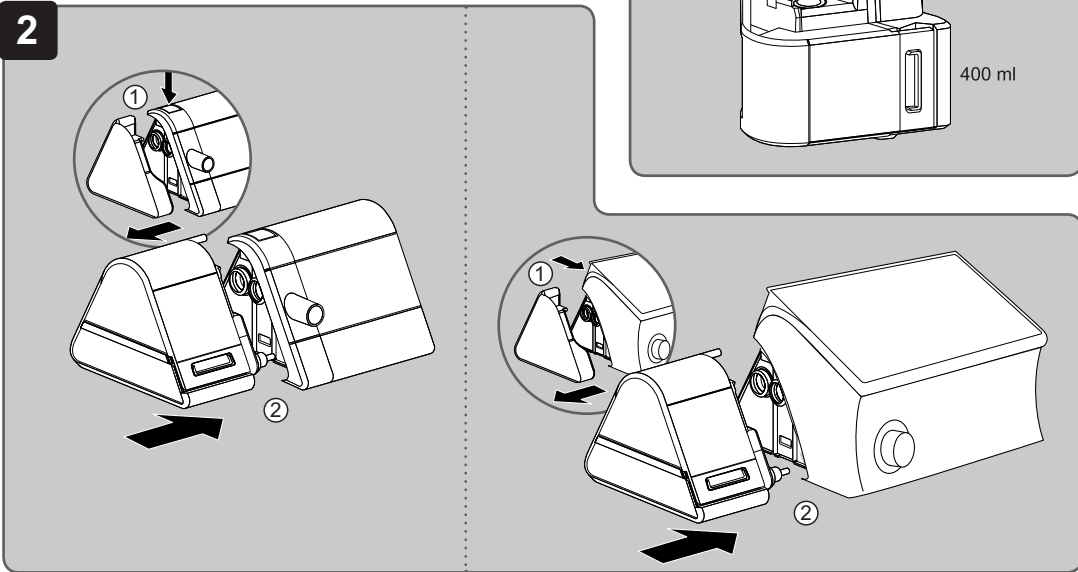
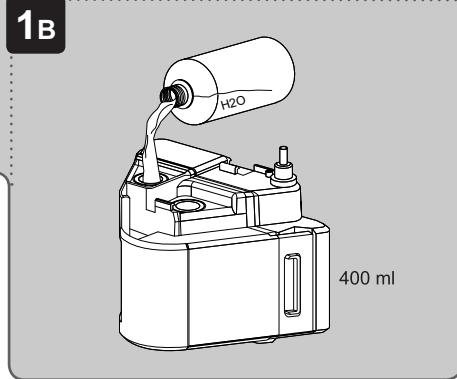
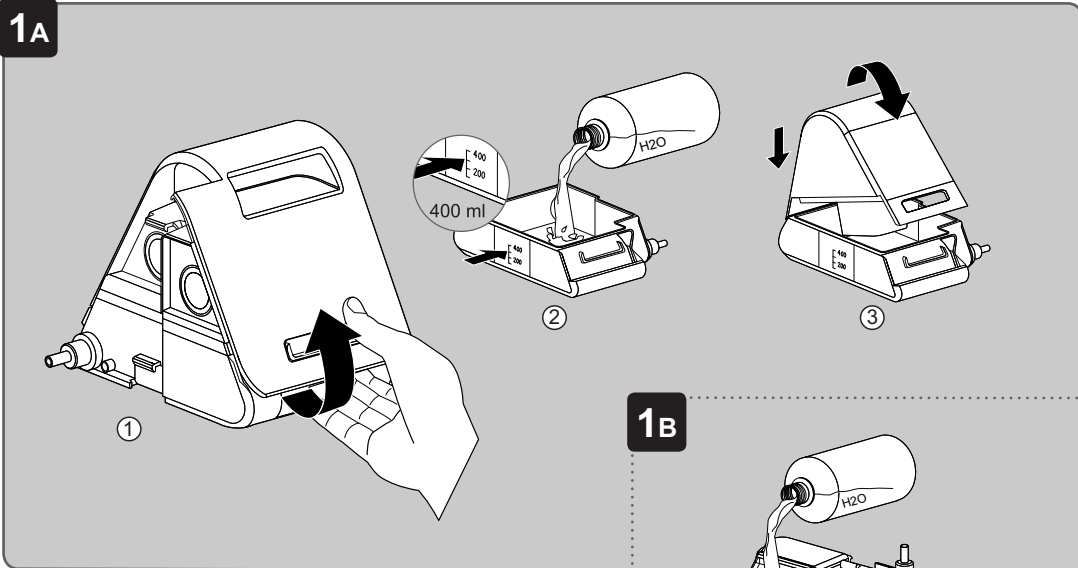
LÖWENSTEIN
medical

LÖWENSTEIN
medical



WM 68250g





10 Technische Daten

| | |
|---|--|
| Produktklasse nach 93/42/EWG | IIa |
| Abmessungen B x H x T in cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Gewicht (ohne Wasser) | 0,6 kg |
| Temperaturbereich Betrieb Lagerung | +5 °C bis +37 °C -25 °C bis +70 °C |
| Zulässige Feuchtigkeit Betrieb und Lagerung | 15 % bis 93 %, nicht kondensierend |
| Luftdruckbereich | 600 hPa-1100 hPa, entspricht einer Höhe von 4000 m ü.NN |
| Elektrische Leistung | Max. 30 VA (nur in Kombination mit dem zugelassenen Gerät) |
| Klassifikation nach EN 60601-1-11: Schutzart gegen elektr. Schlag Schutzgrad gegen elektr. Schlag Schutz gegen schädliches Eindringen von Wasser und Feststoffen | Schutzklasse II Typ BF IP22 |
| Klassifikation nach DIN EN 60601-1: Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach DIN EN 60601-1-2 Funkenstörung Funkstörfestigkeit (Prüfparameter und Grenzwerte können bei Bedarf beim Hersteller angefordert werden) | PEN 55011 B IEC 61000-4 Teil 2 bis 6, Teil 11, Teil 8 IEC 61000-3 Teil 2 und 3 |
| Erwärmung der Atemluft | Max. +3 °C |
| Atemluftbefeuchtersystemabgabe nach ISO 8185 bei Befeuchterstufe 7 ohne beheizbaren Schlauch bei 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Atemluftbefeuchtersystemabgabe nach ISO 8185 bei Befeuchterstufe 7 mit beheizbarem Schlauch bei 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Max. Füllvolumen | 400 ml |
| Druckabfall | Druckabfall über Gerätekombination Therapiegerät WM 100 TD und Atemluftbefeuchter WM 100 TH erhöht sich nicht. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maximalflow | 248 l/min |
| Max. zulässiger Betriebsdruck | 50 hPa |
| Gasleckage bei max. Betriebsdruck | 0,0 l/min |
| WM 100 TH kombinierbar mit | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Konstruktionsänderungen vorbehalten

11 Garantie

Informationen zu Garantiebedingungen können Sie der Gebrauchsanweisung Ihres Therapiegerätes entnehmen.

12 Konformitätserklärung

Informationen zur Konformitätserklärung können Sie der Gebrauchsanweisung Ihres Therapiegerätes entnehmen.

1 Bedienung / Legende

Wie Sie den Atemluftbefeuchter befüllen, anschließen und abnehmen entnehmen Sie bitte den Abbildungen:

- 1A** Atemluftbefeuchter befüllen
- 1B** Atemluftbefeuchter befüllen (Alternative zu 1)
- 2** Atemluftbefeuchter anschließen
- 3** Atemluftbefeuchter abnehmen.
- 4** Atemluftbefeuchter zerlegen.
- 5** Atemluftbefeuchter zusammenbauen.
- 6** Dichtung Heizstab ersetzen.

Atemluftbefeuchter am Therapiegerät einstellen: Je nach verwendetem Therapiegerät unterscheidet sich die Bedienung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Therapiegerätes.

2 Einführung

2.1 Verwendungszweck

Der Atemluftbefeuchter WM 100 TH erwärmt und befeuchtet die Atemluft und verhindert dabei das Austrocknen der Schleimhäute im Atemtrakt. Er kann in klinischen Einrichtungen und im häuslichen Bereich eingesetzt werden.

2.2 Funktionsbeschreibung

Der beheizbare Atemluftbefeuchter funktioniert nach dem Pass-over-Prinzip. Die zugeführte Luft wird über die Oberfläche von warmem Wasser geleitet. Dabei erhöht sich die relative Feuchtigkeit und die Temperatur des Luftstroms. Die Heizleistung ist am Therapiegerät in Stufen einstellbar.

2.3 Indikationen

Trockene obere Atemwege und zu kalt empfundene Atemluft. prismaAQUA darf nur entsprechend der Empfehlung eines Arztes benutzt werden.

2.4 Kontraindikationen

Der Atemluftbefeuchter darf nicht bei Patienten eingesetzt werden, deren obere Atemwege mit einem Bypass umgangen werden.

2.5 Nebenwirkungen

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

3 Sicherheit

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie ist Bestandteil des Atemluftbefeuchters und muss jederzeit verfügbar sein. Gemäß der Richtlinie 93/42/ EWG beachten Sie folgende Punkte.

Infektionsgefahr durch Keime in abgestandenem Wasser!

In abgestandenem Wasser können sich Keime und Bakterien leicht ansiedeln und vermehren.
⇒ Atemluftbefeuchter regelmäßig reinigen.
⇒ Atemluftbefeuchter nur mit frischem Wasser verwenden.

Verletzungsgefahr durch Betrieb des Gerätes außerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen

Der Einsatz des Gerätes außerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen kann zu nicht eingehaltenen Toleranzen und zum Geräteausfall führen und den Patienten verletzen.
⇒ Gerät nur innerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen betreiben (siehe "10 Technische Daten").

Sachschaden durch Überfüllung!

Auslaufendes Wasser kann in das Gerät laufen und es beschädigen.
⇒ Atemluftbefeuchter vor dem Befüllen vom Gerät abnehmen.
⇒ Atemluftbefeuchter nur bis zur Markierung max befüllen.



Sachschaden durch heißes Wasser und aromatische Zusätze!

Heißes Wasser oder aromatische Zusätze (z. B. Eukalyptusöl) können das Gehäuse des Atemluftbefeuchters und den Heizstab beschädigen.
⇒ Kein heißes Wasser einfüllen.
⇒ Keine aromatischen Zusätze verwenden.

3.1 Allgemeine Hinweise

- Die Verwendung von sterilem oder abgekochtem Wasser ist im häuslichen Einsatz nur in medizinischen Ausnahmefällen erforderlich. Verwenden Sie kein destilliertes Wasser, das für technische Zwecke vorgesehen ist, da es mikrobiologisch belastet sein kann.
- Um eine Infektion, bakterielle Kontamination oder Funktionsbeeinträchtigungen zu vermeiden, beachten Sie das Kapitel Hygienische Aufbereitung (siehe "5 Hygienische Aufbereitung").

- Beim Einsatz von Fremdartikeln kann es zu Funktionsausfällen und einer eingeschränkten Gebrauchstauglichkeit kommen. Außerdem können die Anforderungen an die Bio-Kompatibilität nicht erfüllt sein. Beachten Sie, dass in diesen Fällen jeglicher Anspruch auf Garantie und Haftung erlischt, wenn weder das in der Gebrauchsanweisung empfohlene Zubehör noch Originalersatzteile verwendet werden.

| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Herstelldatum (Monat / Jahr) |
| Typ: WM100TH | Typenbezeichnung: Gerät der WM 100 TH |
|  | Gebrauchsanweisung beachten. |
| SN | Seriennummer |

5 Hygienische Aufbereitung

Atemluftbefeuchter wöchentlich reinigen bzw. im Klinikbereich desinfizieren. Bei Bedarf Atemluftbefeuchter entkalken (siehe "5.1 Atemluftbefeuchter entkalken"). Gehäuseteile bei schlechtem Zustand (Rissbildung) ersetzen. Wenn das Therapiegerät oder der Atemluftbefeuchter ohne einen Bakterienfilter verwendet wurden, muss bei einem Patientenwechsel eine professionelle hygienische Aufbereitung vom Fachhändler durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch heißen Heizstab!
Während und kurz nach Betrieb ist der Heizstab heiß und das Berühren kann zu Verbrennungen führen. ⇒ Heizstab vollständig abkühlen lassen.

1. Atemluftbefeuchter zerlegen (Abb. 4).
2. Atemluftbefeuchter gemäß nachfolgender Tabelle hygienisch aufbereiten. Eine Sterilisation ist nicht zulässig.

| Teil | Reinigung | Desinfektion |
|---------------------|--|--|
| Befeuchterunterteil | Mit warmem Wasser und Spülmittel. Empfehlung: Wöchentlich im oberen Korb der Geschirrspülmaschine (max. 65 °C) reinigen. | Tauchdesinfizieren (Empfehlung: gigasept FF®) / 5 Minuten auskochen |
| Befeuchtereinsatz | Wenn notwendig: Entkalken (siehe 5.1) | 5 Minuten auskochen |
| Befeuchteroberteil | Feucht abwischen: Wasser oder milde Seife verwenden; kein Microfasertuch verwenden | Wischdesinfizieren (Empfehlung: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |

4 Produktbeschreibung



4.1 Übersicht

Die Darstellung der Einzelteile finden Sie auf der Umschlagseite.



Legende

1. Befeuchteroberteil
2. Befeuchtereinsatz
3. Befeuchterunterteil
4. Eingangsöffnung
5. Ausgangsöffnung
6. Heizstab

4.2 Kennzeichnungen und Symbole

| Position | Symbol | Beschreibung |
|----------|--|--|
| 4 |  | Wasser einfüllen. |
| 6 |  | Atemluftbefeuchter ist beheizt. Heizstab nicht berühren. |

4.3 Symbole auf dem Geräteschild

| | |
|---|---|
|  | Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen. |
| CE 0197 | CE-Kennzeichnung (bestätigt, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht). |
| 32 V DC | 32 V Gleichspannung |
|  | Anwendungsteil Typ BF |
| IP22 | IP-Schutzklasse: Schutzgrad gegen feste Fremdkörper. Gerät ist tropfwassergeschützt. |
| >PC< | Materialbezeichnung: Polycarbonat |

| Teil | Reinigung | Desinfektion |
|----------|---------------------------------------|---|
| Heizstab | Wenn notwendig: Entkalken (siehe 5.1) | Tauchdesinfizieren (Empfehlung: gigasept FF®) / 5 Minuten auskochen |

3. Teile mit klarem Wasser nachspülen und abtrocknen.
4. Sichtprüfung durchführen.
5. Wenn notwendig: Beschädigte Teile ersetzen.
6. Atemluftbefeuchter zusammenbauen (Abb. 6).

5.1 Atemluftbefeuchter entkalken

1. Atemluftbefeuchter vom Therapiegerät abnehmen (Abb. 4).
2. Atemluftbefeuchter zerlegen (Abb. 4).
3. 300 ml reinen Haushaltsessig (5 %ige Lösung ohne Zusätze) in Befeuchterunterteil einfüllen.
4. Befeuchtereinsatz in eine Schüssel mit reinem Haushaltsessig (5 %ige Lösung ohne Zusätze) geben. Befeuchtereinsatz muss vollständig mit Essig bedeckt sein.
5. Essig für 1 Stunde einwirken lassen.
6. Befeuchterunterteil, Heizstab und Befeuchtereinsatz mit klarem Wasser abspülen.
7. Befeuchterunterteil, Heizstab und Befeuchtereinsatz sorgfältig abtrocknen.
8. Atemluftbefeuchter zusammenbauen (siehe Abb. 5).

5.2 Dichtung Heizstab ersetzen (Abb. 6)

1. Wenn notwendig: Heizstab vollständig abkühlen lassen.
2. Heizstab herausschrauben.
3. Dichtungsring austauschen.
4. Heizstab wieder einsetzen.

6 Funktionskontrolle

Führen Sie nach jeder hygienischen Aufbereitung, nach jeder Instandsetzung, mindestens jedoch alle 6 Monate eine Funktionskontrolle durch.

1. Gehäuseteile auf Risse und Beschädigungen prüfen. Wenn notwendig: Beschädigte Teile ersetzen.

2. Atemluftbefeuchter bis zur Markierung mit Wasser füllen (Siehe Abb. 1A oder 1B).
3. Kontrollieren, ob der Atemluftbefeuchter dicht ist. Wenn notwendig: Beschädigte Teile ersetzen.
4. Atemluftbefeuchter mit 200 ml Wasser füllen.
5. Atemluftbefeuchter an das Therapiegerät anschließen und einschalten.
6. Heizleistung auf die höchste Stufe stellen.
7. Prüfen, ob sich der Atemluftbefeuchter erwärmt.
8. Wenn sich der Atemluftbefeuchter nach 10 Minuten nicht leicht erwärmt: Fachhändler kontaktieren.

7 Störungen

| Störung | Ursache | Behebung |
|--|---|--|
| Atemluftbefeuchter erwärmt sich nicht. | Befeuchterstufe ausgeschaltet. | Befeuchterstufe einstellen. |
| | Atemluftbefeuchter defekt. | Atemluftbefeuchter in stand setzen lassen. |
| Atemluftbefeuchter ist undicht. | Dichtung des Heizstabs defekt. | Dichtung ersetzen (siehe 5.2). |
| | Befeuchtereinsatz nicht korrekt eingesetzt. | Befeuchtereinsatz korrekt einsetzen. |
| | Befeuchtereinsatz ist defekt. | Befeuchtereinsatz ersetzen. |
| | Risse im Befeuchterunterteil. | Befeuchterunterteil ersetzen. |
| Atemluftbefeuchter schaltet sich aus. | Atemluftbefeuchter ist leer. | Atemluftbefeuchter mit Wasser befüllen. |

8 Wartung

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (siehe "2.1 Verwendungszweck") ist der Atemluftbefeuchter wartungsfrei.

9 Lieferumfang

- prismaAQUA, schwarz - WM 29680
- prismaAQUA, weiß - WM 29490

9.1 Zubehör und Ersatzteile

Sie können bei Bedarf Zubehör- und Ersatzteile gesondert bestellen. Eine aktuelle Liste können Sie im Internet oder über Ihren autorisierten Fachhändler beziehen.

| | |
|---|--|
| Power capacity | Max. 30 VA (only in combination with the approved device) |
| Classification to EN 60601-1-11: type of protection against electric shock degree of protection against electric shock protection against damaging ingress of water and solids | Protection class II Type BF IP22 |
| Classification to DIN EN 60601-1: operating mode | Continuous duty |
| Electromagnetic compatibility (EMC) to DIN EN 60601-1-2 radio interference suppression radio interference immunity (Test parameters and limit values can be obtained from the manufacturer on request) | PEN 55011 B IEC 61000-4 Parts 2 to 6, Part 11, Part 8 EN 61000-3 Parts 2 and 3 |
| Heating of respiratory air | Max. +3 °C |
| Humidification system output to ISO 8185 at humidifier stage 7 without heatable tube at 23 °C - 5 hPa (12.2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25.9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Humidification system output to ISO 8185 at humidifier stage 7 with heatable tube at 23 °C - 5 hPa (12.2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25.9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Max. filling volume | 400 ml |
| Pressure drop | Pressure drop does not increase as a result of combining therapy device WM 100 TD with humidifier WM 100 TH. |
| Maximum flow | 248 l/min |
| Max. permissible operating pressure | 50 hPa |
| Gas leak at max. operating pressure | 0.0 l/min |
| WM 100 TH can be combined with | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

The right to make design modifications is reserved

11 Warranty

For information about warranty conditions, see the Instructions for Use for your therapy device.

12 Declaration of conformity

For information about the declaration of conformity, see the Instructions for Use for your therapy device.

1 Operation/key

See the figures for how to fill, connect and remove the humidifier:

- 1A Filling the humidifier
- 1B Filling the humidifier (alternative to 1)
- 2 Connecting the humidifier
- 3 Removing the humidifier
- 4 Dismantling the humidifier
- 5 Assembling the humidifier
- 6 Replacing the heater rod seal

Making humidifier settings on the therapy device:

operation differs depending on the therapy device used. Follow the Instructions for Use for your therapy device.

2 Introduction

2.1 Intended use

Humidifier WM 100 TH warms and humidifies respiratory air and so prevents the mucous membranes in the respiratory tract from drying out. It can be used in clinical facilities and in the domestic sphere.

2.2 Description of function

The heatable humidifier operates in accordance with the "pass-over" principle. The air supplied is passed over the surface of warm water. This increases the relative humidity and the temperature of the air flow. Heating capacity can be set on the therapy device in stages.

2.3 Indications

Dry upper airways and respiratory air perceived to be too cold. prismaAQUA may only be used in accordance with a physician's recommendation.

2.4 Contraindications

The humidifier may not be used on patients whose upper airways have been bypassed.

2.5 Side effects

No side effects are known.

3 Safety

Please read these Instructions for Use carefully. They are a constituent part of the humidifier and must be available at all times. In accordance with Directive 93/42/EEC, observe the points below.

Risk of infection from germs in stale water!

Germs and bacteria can easily colonize and multiply in stale water.

⇒ Clean the humidifier regularly.

⇒ Only use the humidifier with fresh water.

Risk of harm from operating the device outside the specified ambient conditions

Using the device outside the specified ambient conditions may lead to tolerances being exceeded and to device failure and harm the patient.

⇒ Only operate the device within the specified ambient conditions (see "10 Technical data").

Material damage from overfilling!

Escaping water may run into the device and damage it.

⇒ Take the humidifier off the device before filling it.

⇒ Only fill the humidifier up to the "max." mark.

Material damage from hot water and aromatic additives!

Hot water or aromatic additives (such as eucalyptus oil) may damage the housing of the humidifier and the heater rod.

⇒ Do not fill with hot water.

⇒ Do not use any aromatic additives.

3.1 General information

- In the domestic sphere, sterile or boiled water need only be used in exceptional medical cases. Do not use distilled water intended for technical purposes as it may be microbiologically contaminated.
- To prevent infection, bacterial contamination or functional impairments, follow the instructions in the section entitled "Hygiene treatment" (see "5 Hygiene treatment").
- If third-party items are used, functional failures and restricted fitness for use may result. Biocompatibility requirements may also not be met. In such cases, please be aware that any claim under warranty and liability will be void if neither the accessories nor the genuine replacement parts recommended in the Instructions for Use are used.

4 Product description



4.1 Overview

A diagram of the individual parts can be found on the fold-out page.






Key

1. Upper part of humidifier
2. Humidifier insert
3. Lower part of humidifier
4. Inlet opening
5. Outlet opening
6. Heater rod

4.2 Marks and symbols

| Position | Symbol | Description |
|----------|---|---|
| 4 |  | Fill with water. |
| 6 |  | Humidifier is heating. Do not touch heater rod. |

4.3 Symbols on the device ID plate

| | |
|---|---|
|  | Do not dispose of device in domestic waste. |
|  0197 | CE symbol (confirms that the product conforms to the applicable European directives). |
| 32 V DC | 32 V direct voltage |
|  | Application part type BF |
| IP22 | IP protection class Degree of protection against solid foreign bodies. Device is protected against drips. |
| >PC< | Material designation: polycarbonate |
|  | Date of manufacture (month/year) |
| Type: WM100TH | Type designation: Device of the WM 100 TH type |
|  | Follow Instructions for Use. |
| SN | Serial number |

5 Hygiene treatment

Clean - or in the clinical sphere disinfect - the humidifier weekly. If necessary, descale the humidifier (see "5.1 Descaling the humidifier"). Replace housing parts if they are in poor condition (cracked). If the therapy device or the humidifier have been used without a bacteria filter, the specialist dealer must perform a professional hygiene treatment on change of patient.

WARNING

Risk of injury from hot heater rod!

During and shortly after operation, the heater rod is hot and touching it can lead to burns.

⇒ Allow the heater rod to cool down completely.

1. Dismantling the humidifier (Fig. 4).
2. Subject the humidifier to a hygiene treatment in accordance with the table below. Sterilizing is not permitted.

| Part | Cleaning | Disinfecting |
|--------------------------|---|--|
| Lower part of humidifier | With hot water and detergent. Recommended: wash weekly in the top basket of a dishwasher (max. 65 °C). | Disinfect by immersion (recommended: gigasept FF®) / boil for 5 minutes |
| Humidifier insert | If necessary: descale (see 5.1) | Boil for 5 minutes |
| Upper part of humidifier | Wipe down: use water or mild detergent; do not use microfiber cloth | Disinfect by wiping (recommended: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |
| Heater rod | If necessary: descale (see 5.1) | Disinfect by immersion (recommended: gigasept FF®) / Disinfect by spraying (recommended: perform advanced) or boil for 5 minutes |

3. Rinse off parts with clean water and dry.
4. Perform a visual inspection.
5. If necessary: replace damaged parts.
6. Assembling the humidifier (Fig. 6).

5.1 Descaling the humidifier

1. Remove the humidifier from the therapy device (Fig. 4).
2. Dismantle the humidifier (Fig. 4).
3. Pour 300 ml pure household vinegar (5 % solution without additives) into the lower part of the humidifier.
4. Put the humidifier insert in bowl of pure household vinegar (5 % solution without additives). Humidifier insert must be completely covered with vinegar.
5. Leave vinegar to take effect for 1 hour.
6. Rinse off the lower part of the humidifier, the heater rod and the humidifier insert with clean water.
7. Carefully dry the lower part of the humidifier, the heater rod and the humidifier insert.
8. Assemble the humidifier (see Fig. 5).

5.2 Replacing the heater rod seal (Fig. 6)

1. If necessary: allow the heater rod to cool down completely.
2. Unscrew the heater rod.
3. Replace the sealing ring.
4. Put the heater rod back in.

6 Function check

Carry out a function check after every hygiene treatment and repair, but at least every 6 months.

1. Check housing parts for cracks and damage. If necessary: replace damaged parts.
2. Fill humidifier with water up to the mark (see Fig. 1A or 1B).
3. Check whether the humidifier has any leaks. If necessary: replace damaged parts.
4. Fill humidifier with 200 ml water.
5. Connect the humidifier to the therapy device and switch on.
6. Set heating capacity to the highest stage.
7. Check whether the humidifier is heating up.
8. If the humidifier does not heat up slightly after 10 minutes: contact your specialist dealer.

7 Troubleshooting

| Fault | Cause | Remedy |
|------------------------------|--|-------------------------------------|
| Humidifier does not warm up. | Humidifier stage switched off. | Set humidifier stage. |
| | Humidifier is faulty. | Have humidifier repaired. |
| Humidifier is leaking. | Heater rod seal is faulty. | Replace seal (see 5.2). |
| | Humidifier insert is not inserted correctly. | Insert humidifier insert correctly. |
| | Humidifier insert is faulty. | Replace humidifier insert. |
| | Cracks in lower part of humidifier. | Replace lower part of humidifier. |
| Humidifier switches off. | Humidifier is empty. | Fill humidifier with water. |

8 Servicing

If used in accordance with purpose (see "2.1 Intended use") the humidifier requires no servicing.

9 Scope of supply

prismaAQUA, black - WM 29680

prismaAQUA, white - WM 29490

9.1 Accessories and replacement parts

You can order accessories and replacement parts separately if necessary. You can order a current list on the Internet or via your specialist dealer.

10 Technical data

| | |
|--|--|
| Product class to 93/42/EEC | Ila |
| Dimensions W x H x D in cm | 14 x 13.5 x 18 |
| Weight (without water) | 0.6 kg |
| Temperature range operation storage | +5 °C to +37 °C -25 °C to +70 °C |
| Permitted humidity for operation and storage | 15 % to 93 %, no condensation |
| Air pressure range | 600 hPa - 1100 hPa, corresponds to an altitude of 4000 m above MSL |

9 Étendue de la fourniture

prismaAQUA, noir - WM 29680

prismaAQUA, blanc - WM 29490

9.1 Accessoires et pièces de rechange

Si nécessaire, vous pouvez commander les pièces de rechange et les accessoires séparément. Une liste actuelle est disponible sur Internet ou auprès de votre revendeur agréé.

10 Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Classe produit selon 93/42/CEE | IIa |
| Dimensions l x H x P en cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Poids (sans eau) | 0,6 kg |
| Plage de température Fonctionnement Stockage | +5 °C à +37 °C -25 °C à +70 °C |
| Humidité autorisée, fonctionnement et stockage | 15 % à 93 %, sans condensation |
| Plage de pression atmosphérique | 600 hPa-1100 hPa, correspond à une altitude de 4000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Puissance électrique | Max. 30 VA (uniquement en combinaison avec l'appareil autorisé) |
| Classification selon EN 60601-1-11 : Type de protection contre les décharges électriques Indice de protection contre les décharges électriques Protection contre les infiltrations dangereuses d'eau et de corps solides | Classe de protection II Type BF IP22 |
| Classification selon DIN EN 60601-1 : mode de fonctionnement | Fonctionnement continu |
| Compatibilité électromagnétique (CEM) selon DIN EN 60601-1-2 Antiparasitage Immunité aux parasites (les paramètres de contrôle et les valeurs limites peuvent être obtenus auprès du fabricant si nécessaire) | PEN 55011 B CEI 61000-4 partie 2 à 6, partie 11, partie 8 CEI 61000-3 parties 2 et 3 |
| Chauffage de l'air respiré | Max. +3 °C |

| | |
|--|--|
| Débit du système d'humidificateur selon ISO 8185 au niveau d'humidification 7 sans tuyau chauffant à 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Débit du système d'humidificateur selon ISO 8185 au niveau d'humidification 7 avec tuyau chauffant à 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Capacité de remplissage max. | 400 ml |
| Chute de pression | La combinaison appareil de thérapie WM 100 TD et humidificateur WM 100 TH n'entraîne pas d'augmentation de la chute de pression. |
| Débit maximal | 248 l/min |
| Pression de service max. autorisée | 50 hPa |
| Fuite de gaz à la pression de service max. | 0,0 l/min |
| WM 100 TH combinable avec | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Sous réserve de modifications de conception

11 Garantie

Vous trouverez des informations sur les conditions de garantie dans le mode d'emploi de votre appareil de thérapie.

12 Déclaration de conformité

Vous trouverez des informations sur la déclaration de conformité dans le mode d'emploi de votre appareil de thérapie.

1 Utilisation/légende

Les figures vous indiquent comment remplir, raccorder et retirer l'humidificateur :

- 1A** Remplissage de l'humidificateur
- 1B** Remplissage de l'humidificateur (en alternative à 1)
- 2** Raccordement de l'humidificateur
- 3** Retrait de l'humidificateur
- 4** Désassemblage de l'humidificateur
- 5** Assemblage de l'humidificateur
- 6** Remplacement du joint de la résistance chauffante

Régler l'humidificateur sur l'appareil de thérapie : l'utilisation varie en fonction de votre appareil de thérapie. respectez le mode d'emploi de votre appareil de thérapie.

2 Introduction

2.1 Usage prévu

L'humidificateur WM 100 TH réchauffe et humidifie l'air respiré et prévient ainsi le dessèchement des muqueuses dans les voies respiratoires. Il peut être utilisé dans les établissements cliniques et dans le cadre des soins à domicile.

2.2 Description du fonctionnement

L'humidificateur chauffant fonctionne selon le principe du « pass-over ». L'air entrant dans l'appareil est amené à la surface d'une réserve d'eau préchauffée. Ceci permet d'augmenter l'humidité relative et la température du flux d'air. La puissance de chauffage est réglable par paliers sur l'appareil de thérapie.

2.3 Indications

Voies respiratoires supérieures desséchées ou air respiré ressenti comme trop froid. L'appareil prismaAQUA doit uniquement être utilisé selon les recommandations d'un médecin.

2.4 Contre-indications

L'humidificateur ne doit pas être utilisé chez les patients dont les voies respiratoires supérieures sont contournées à l'aide d'un by-pass.

2.5 Effets secondaires

Aucun effet secondaire n'est connu.

3 Sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il fait partie intégrante de l'humidificateur et doit être disponible à tout moment. Conformément à la directive 93/42/CEE, veuillez respecter les points suivants.

Risque d'infection par des germes contenus dans l'eau stagnante !

Des germes et des bactéries peuvent facilement se développer et se multiplier dans l'eau stagnante.
⇒ Nettoyer régulièrement l'humidificateur.
⇒ Utiliser l'humidificateur uniquement avec de l'eau fraîche.

Risque de blessure en cas d'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes autres que celles prescrites

L'utilisation de l'appareil dans des conditions ambiantes autres que celles prescrites compromet le respect des tolérances et peut entraîner une panne de l'appareil ainsi que des blessures du patient.
⇒ Utiliser l'appareil uniquement dans les conditions ambiantes prescrites (voir « 10 Caractéristiques techniques »).

Dommages matériels dus à un trop-plein !

L'eau qui s'écoule risque de pénétrer dans l'appareil et de l'endommager.
⇒ Retirer l'humidificateur de l'appareil avant le remplissage.
⇒ Remplir l'humidificateur uniquement jusqu'au repère max.

Dommages matériels dus à l'eau très chaude et aux substances aromatiques !

L'eau très chaude et les substances aromatiques (par ex. essence d'eucalyptus) peuvent endommager le boîtier de l'humidificateur ainsi que la résistance chauffante.
⇒ Ne pas utiliser d'eau très chaude pour le remplissage.
⇒ Ne pas utiliser de substances aromatiques.

3.1 Remarques générales

- Dans le cadre des soins à domicile, l'utilisation d'eau stérile ou fraîchement bouillie est uniquement nécessaire dans des cas médicaux exceptionnels. N'utilisez pas d'eau distillée à usage technique. Cette eau peut être contaminée par des agents microbiologiques.
- Respectez les instructions fournies au chapitre Décontamination (voir « 5 Décontamination ») pour éviter toute infection, contamination bactérienne ou restriction du fonctionnement.

- L'utilisation d'articles d'une autre marque risque d'entraîner des pannes de fonctionnement ainsi qu'une aptitude à l'emploi limitée. En outre, les exigences relatives à la biocompatibilité risquent de ne pas être remplies. Veuillez noter que, dans ces cas, tout droit relatif à la garantie et à la responsabilité sera annulé si ni les accessoires recommandés dans le mode d'emploi ni des pièces de rechange d'origine ne sont utilisés.

4 Description du produit



4.1 Aperçu

Les différentes pièces sont représentées sur la page de couverture.



Légende



- Partie supérieure de l'humidificateur
- Insert de l'humidificateur
- Partie inférieure de l'humidificateur
- Ouverture d'entrée
- Ouverture de sortie
- Résistance chauffante

4.2 Marquages et symboles

| Position | Symbole | Description |
|----------|---|--|
| 4 |  | Verser de l'eau dans l'appareil. |
| 6 |  | L'humidificateur est chauffé. Ne pas toucher la résistance chauffante. |

4.3 Symboles sur la plaque signalétique

| | |
|---|---|
|  | Ne pas éliminer l'appareil avec les déchets ménagers. |
| CE 0197 | Marquage CE (certifie que le produit est conforme aux directives européennes en vigueur). |
| 32 V CC | 32 V de tension continue |
|  | Partie appliquée de type BF |
| IP22 | Classe de protection IP : indice de protection contre les corps étrangers solides. L'appareil est protégé contre les gouttes d'eau. |
| >PC< | Désignation du matériau : polycarbonate |

| | |
|---|--|
|  | Date de fabrication (mois/année) |
| Type : WM100TH | Désignation du type : appareil de la série WM 100 TH |
|  | Respecter le mode d'emploi. |
| SN | Numéro de série |

5 Décontamination

Nettoyer l'humidificateur chaque semaine ou, dans un environnement clinique, le désinfecter à un rythme hebdomadaire. Au besoin, détartrer l'humidificateur (voir « 5.1 Détartrage de l'humidificateur »). Remplacer les pièces du boîtier si elles sont en mauvais état (fissuration). Si l'appareil de thérapie ou l'humidificateur a été utilisé sans filtre antibactérien, une décontamination professionnelle doit être effectuée par le revendeur lors du changement de patient.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la résistance chauffante très chaude !

Pendant et juste après le fonctionnement, la résistance chauffante est très chaude et peut provoquer des brûlures en cas de contact.
⇒ Laisser refroidir complètement la résistance chauffante.

- Désassembler l'humidificateur (fig. 4).
- Décontaminer l'humidificateur conformément au tableau suivant. Il est interdit d'effectuer une stérilisation.

| Pièce | Nettoyage | Désinfection |
|---------------------------------------|---|---|
| Partie inférieure de l'humidificateur | Avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Recommandation : nettoyage chaque semaine dans le panier supérieur du lave-vaisselle (max. 65 °C). Si nécessaire : détartrage (voir 5.1) | Désinfection par immersion (recommandation : gigasept FF®)/faire bouillir pendant 5 minutes |
| Insert de l'humidificateur | | Faire bouillir pendant 5 minutes |
| Partie supérieure de l'humidificateur | Essuyage avec un chiffon humide : utiliser de l'eau ou un savon doux ; ne pas utiliser de chiffon microfibre | Désinfection par essuyage (recommandation : terralin® protect/perform advanced Alcohol EP) |

| Pièce | Nettoyage | Désinfection |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
| Résistance chauffante | Si nécessaire : détartrage (voir 5.1) | Désinfection par immersion (recommandation : gigasept FF®) Désinfection par vaporisation (recommandation : perform advanced) ou faire bouillir pendant 5 minutes |

- Rincer les pièces à l'eau claire et les essuyer.
- Procéder à un contrôle visuel.
- Si nécessaire : remplacer les pièces endommagées.
- Assembler l'humidificateur (fig. 6).

5.1 Détartrage de l'humidificateur

- Retirer l'humidificateur de l'appareil de thérapie (fig. 4).
- Désassembler l'humidificateur (fig. 4).
- Verser 300 ml de vinaigre de cuisine pur (solution à 5 % sans additifs) dans la partie inférieure de l'humidificateur.
- Placer l'insert de l'humidificateur dans un récipient contenant du vinaigre de cuisine pur (solution à 5 % sans additifs). L'insert de l'humidificateur doit être entièrement immergé dans le vinaigre.
- Laisser agir le vinaigre pendant 1 heure.
- Rincer la partie inférieure, la résistance chauffante et l'insert de l'humidificateur à l'eau claire.
- Essuyer soigneusement la partie inférieure, la résistance chauffante et l'insert de l'humidificateur.
- Assembler l'humidificateur (voir fig. 5).

5.2 Remplacement du joint de la résistance chauffante (fig. 6)

- Si nécessaire : laisser refroidir complètement la résistance chauffante.
- Dévisser la résistance chauffante.
- Remplacer la bague d'étanchéité.
- Remettre la résistance chauffante en place.

6 Contrôle fonctionnel

Procédez à un contrôle fonctionnel après chaque décontamination et chaque réparation, mais au moins tous les 6 mois.

- Vérifier que les pièces du boîtier ne présentent pas de fissures et ne sont pas endommagées. Si nécessaire : remplacer les pièces endommagées.
- Remplir l'humidificateur d'eau jusqu'au repère (voir fig. 1A ou 1B).
- Contrôler l'étanchéité de l'humidificateur. Si nécessaire : remplacer les pièces endommagées.
- Remplir l'humidificateur de 200 ml d'eau.
- Raccorder l'humidificateur à l'appareil de thérapie et le mettre en marche.
- Régler la puissance de chauffage au niveau le plus élevé.
- Vérifier si l'humidificateur chauffe.
- Si l'humidificateur ne chauffe pas légèrement au bout de 10 minutes : contacter le revendeur.

7 Dysfonctionnements

| Dysfonctionnement | Cause | Remède |
|-------------------------------------|---|--|
| L'humidificateur ne chauffe pas. | Niveau d'humidification désactivé. | Régler le niveau d'humidification. |
| | L'humidificateur est défectueux. | Faire réparer l'humidificateur. |
| L'humidificateur n'est pas étanche. | Joint de la résistance chauffante défectueux. | Remplacer le joint (voir 5.2). |
| | L'insert de l'humidificateur n'est pas installé correctement. | Installer correctement l'insert de l'humidificateur. |
| | L'insert de l'humidificateur est défectueux. | Remplacer l'insert de l'humidificateur. |
| | Fissures dans la partie inférieure de l'humidificateur. | Remplacer la partie inférieure de l'humidificateur. |
| L'humidificateur se coupe. | L'humidificateur est vide. | Remplir l'humidificateur d'eau. |

8 Maintenance

Lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage prévu (voir « 2.1 Usage prévu »), l'humidificateur est un appareil sans maintenance.

9 Omvang van de levering

prismaAQUA, zwart - WM 29680
prismaAQUA, wit - WM 29490

9.1 Accessoires en reserveonderdelen

U kunt desgewenst accessoires en reserveonderdelen apart bestellen. Een actuele lijst is verkrijgbaar in het internet of via de geautoriseerde vakhandelaar.

10 Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Productklasse volgens 93/42/EEG | Ila |
| Afmetingen B x H x D in cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Gewicht (zonder water) | 0,6 kg |
| Temperatuurbereik Werking Opslag | +5 °C tot +37 °C -25 °C tot +70 °C |
| Toegelaten vochtigheid gedurende werking en opslag | 15 % tot 93 %, niet condenserend |
| Luchtdrukgebied | 600 hPa-1100 hPa, komt overeen met een hoogte van 4000 m boven NN |
| Elektrisch vermogen | Max. 30 VA (alleen in combinatie met het toegelaten apparaat) |
| Classificatie volgens EN 60601-1-11: Bescherming tegen elektrische schokken Beschermingsgraad tegen elektrische schokken Bescherming tegen schadelijk binnendringen van water en vaste deeltjes | Beschermklasse II Type BF IP22 |
| Classificatie volgens DIN EN 60601-1: Bedrijfssoort | Permanente werking |
| Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) overeenkomstig EN 60601-1-2 Radio-ontstoring Radiostoringsbestendigheid (De testparameters en grenswaarden kunnen desgewenst bij de fabrikant worden aangevraagd) | PEN 55011 B IEC 61000-4 deel 2 tot 6, deel 11, deel 8 IEC 61000-3 deel 2 en 3 |
| Verwarming van de ademlucht | Max. +3 °C |

| | |
|--|--|
| Systeemafgifte ademluchtbevochtiger overeenkomstig ISO 8185 bij bevochtigertrap 7 zonder verwarmbare slang bij 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Systeemafgifte ademluchtbevochtiger overeenkomstig ISO 8185 bij bevochtigertrap 7 met verwarmbare slang bij 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Max. vulvolume | 400 ml |
| Drukdaling | Drukdaling via apparatencombinatie therapieapparaten WM 100 TD en ademluchtbevochtiger WM 100 TH verhoogt zich niet. |
| Maximale flow | 248 l/min |
| Max. toelaatbare werkingsdruk | 50 hPa |
| Gaslekage bij max. werkingsdruk | 0,0 l/min |
| WM 100 TH te combineren met | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Wijzigingen van de constructie voorbehouden

11 Garantie

Informatie over de garantiebepalingen staat vermeld in de gebruiksaanwijzing van het therapieapparaat.

12 Verklaring van overeenkomst

Informatie over de verklaring van overeenkomst staat vermeld in de gebruiksaanwijzing van het therapieapparaat.

1 Bediening / Legenda

Zie de afbeeldingen voor het vullen, het aansluiten en afnemen van de ademluchtbevochtiger:

- 1A** Ademluchtbevochtiger vullen
- 1B** Ademluchtbevochtiger vullen (alternatief voor 1)
- 2** Ademluchtbevochtiger aansluiten
- 3** Ademluchtbevochtiger afnemen.
- 4** Ademluchtbevochtiger demonteren.
- 5** Ademluchtbevochtiger monteren.
- 6** Afdichting verwarmingsstaaf vervangen.

Ademluchtbevochtiger op therapieapparaat instellen: Afhankelijk van het gebruikte therapieapparaat verschilt de bediening. Let op de gebruiksaanwijzing van uw therapieapparaat.

2 Introductie

2.1 Toepassingsdoel

De ademluchtbevochtiger WM 100 TH verwarmt en bevochtigt de ademlucht en voorkomt daarbij dat de slijmvliezen in de luchtwegen uitdrogen. Hij kan in ziekenhuizen en thuis worden toegepast.

2.2 Functiebeschrijving

De verwarmbare ademluchtbevochtiger functioneert volgens het pass-over principe. De toegevoerde lucht wordt over het oppervlak van warm water geleid. Daarbij wordt de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur van de luchtstroom verhoogd. De verwarmingscapaciteit is op het therapieapparaat in trappen instelbaar.

2.3 Indicaties

Droge bovenste luchtwegen en als te koud gevoelde ademlucht. prismaAQUA mag alleen overeenkomstig de aanbeveling van een arts worden gebruikt.

2.4 Contra-indicaties

De ademluchtbevochtiger mag niet bij patiënten worden gebruikt, bij wie de bovenste ademwegen met een bypass werden overbrugd.

2.5 Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend.

3 Veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Deze is bestanddeel van de ademluchtbevochtiger en moet te allen tijde aanwezig zijn. Volgens de richtlijn 93/42/EEG dient u de volgende punten in acht te nemen.

Infectiegevaar door bacteriën in muf water!
In muf water kunnen zich gemakkelijk kiemen en bacteriën verzamelen en vermenigvuldigen.
⇒ De ademluchtbevochtiger regelmatig reinigen.
⇒ De ademluchtbevochtiger alleen met vers water gebruiken.

Gevaar voor letsel door de werking van het apparaat buiten de voorgeschreven omgevingsvoorwaarden

Het gebruik van het apparaat buiten de voorgeschreven omgevingsvoorwaarden kan ertoe leiden dat de toleranties niet worden aangehouden, dat het apparaat uitvalt en de patiënt letsel oploopt.
⇒ Gebruik het apparaat alleen binnen de voorgeschreven omgevingsvoorwaarden (zie "10 Technische gegevens").

Materiaalschade door te vol vullen!
Uitlopend water kan in het apparaat lopen en het beschadigen.

⇒ De ademluchtbevochtiger voor het vullen van het apparaat losmaken.
⇒ De ademluchtbevochtiger alleen tot de markering max. vullen.



Materiaalschade door heet water en aromatische toevoegingen!

Heet water of aromatische olie (bijv. eucalyptusolie) kunnen de behuizing van de ademluchtbevochtiger en de verwarmingsstaaf beschadigen.
⇒ Vul geen heet water in het apparaat.
⇒ Geen aromatische toevoegingen gebruiken.

3.1 Algemene aanwijzingen

- Het gebruik van steriel of gekookt water is bij de toepassing thuis alleen in medische uitzonderingsgevallen nodig. Gebruik geen gedestilleerd water dat voor technische doeleinden is bestemd, omdat het microbiologisch belast kan zijn.
- Om infecties, bacteriële contaminatie of afbreuk aan de werking te voorkomen zie het hoofdstuk Hygiënische voorbereiding (zie "5 Hygiënische voorbereiding").

- Het gebruik van producten van derden kan tot het uitvallen van functies en een beperkte gebruiksgeschiktheid leiden. Bovendien bestaat de kans dat niet is voldaan aan de eisen voor de bio-compatibiliteit. Houd er rekening mee dat in deze gevallen elke aanspraak op garantie en aansprakelijkheid vervalt, wanneer niet de in de gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires of geen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

| | |
|---|---|
|  | Productiedatum (maand/jaar) |
| Type: WM100TH | Typeaanduiding: Apparaat van de WM 100 TH |
|  | Gebruiksaanwijzing in acht nemen. |
| SN | Serienummer |

4 Productbeschrijving


4.1 Overzicht

De weergave van de afzonderlijke onderdelen vindt u op de omslag.



Legenda

- Bovengedeelte bevochtiger
- Inzetstuk bevochtiger
- Ondergedeelte bevochtiger
- Ingangsopening
- Uitgangsopening
- Verwarmingsstaaf

4.2 Markeringen en symbolen

| Functie | Symbool | Beschrijving |
|---------|--|--|
| 4 |  | Water vullen. |
| 6 |  | Ademluchtbevochtiger is verwarmd. Raak de verwarmingsstaaf niet aan. |

4.3 Symbolen op het typeplaatje

| | |
|---|---|
|  | Apparaat niet bij het huisvuil verwijderen. |
| CE 0197 | CE-markering (bevestigt dat het apparaat voldoet aan de geldende Europese richtlijnen). |
| 32 V DC | 32 V gelijkspanning |
|  | Toegepast onderdeel type BF |
| IP22 | IP-beschermklasse: Beschermingsgraad tegen vaste vreemde deeltjes. Het apparaat is tegen druiptwater beschermd. |
| >PC< | Materiaalaanduiding: Polycarbonaat |

5 Hygiënische voorbereiding

De ademluchtbevochtiger wekelijks reinigen resp. in het ziekenhuis desinfecteren. Indien nodig de ademluchtbevochtiger ontkalken (zie "5.1 Ademluchtbevochtiger ontkalken"). Delen van de behuizing bij slechte toestand (scheurvorming) vervangen. Wanneer het therapieapparaat of de ademluchtbevochtiger zonder een bacteriënfilter worden gebruikt, moet bij een wissel van de patiënt een professionele hygiënisch voorbereiding door de vakhandelaar worden uitgevoerd.

 **WAARSCHUWING**

Gevaar voor letsel door hete verwarmingsstaaf!
Tijdens en kort na de werking is de verwarmingsstaaf heet en kan het aanraken ervan tot verbrandingen leiden.
⇒ Verwarmingsstaaf volledig laten afkoelen.

- De ademluchtbevochtiger demonteren (afb. 4).
- Ademluchtbevochtiger volgens de volgende tabel hygiënisch voorbereiden. Een sterilisatie is niet toegestaan.

| Onderdeel | Reiniging | Desinfectie |
|--------------------------|---|---|
| Bevochtigerondergedeelte | Met warm water en afwasmiddel. Aanbeveling: wekelijks in de bovenste mand van de vaatwasmachine (max. 65 °C) reinigen. | Dompeldesinfectie (Aanbeveling: gigasept FF®) / 5 minuten koken |
| Inzetstuk bevochtiger | Indien noodzakelijk: Ontkalken (zie 5.1) | 5 Minuten koken |
| Bevochtigerbovengedeelte | Vochtig afnemen: Water of milde zeep gebruiken; gene microvezeldoekje gebruiken | Wisdesinfectie (aanbeveling: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |

| Onderdeel | Reiniging | Desinfectie |
|------------------|--|--|
| Verwarmingsstaaf | Indien noodzakelijk: Ontkalken (zie 5.1) | Dompeldesinfectie (aanbeveling: gigasept FF®) Sproeidesinfectie (aanbeveling: perform advanced) of 5 minuten koken |

- Onderdelen met helder water afspoelen en afdrogen.
- Visuele controle uitvoeren.
- Indien noodzakelijk: beschadigde delen vervangen.
- De ademluchtbevochtiger monteren (afb. 6).

5.1 Ademluchtbevochtiger ontkalken

- De ademluchtbevochtiger van het therapieapparaat verwijderen (afb. 4).
- De ademluchtbevochtiger demonteren (afb. 4).
- 300 ml zuivere huishoudazijn (5 %oplossing, zonder toevoegingen) in het ondergedeelte van de bevochtiger vullen.
- Het bevochtigerinzetstuk in een kom met zuivere huishoudazijn (5 %oplossing, zonder toevoegingen) vullen. Het bevochtigerinzetstuk moet volledig met azijn zijn bedekt.
- Azijn 1 uur laten inwerken.
- Ondergedeelte van de bevochtiger, verwarmingsstaaf en bevochtigerinzetstuk met helder water afspoelen.
- Ondergedeelte van de bevochtiger, verwarmingsstaaf en bevochtigerinzetstuk zorgvuldig afdrogen.
- De ademluchtbevochtiger monteren (zie afb. 5).

5.2 Afdichting verwarmingsstaaf vervangen (afb. 6)

- Indien noodzakelijk: Verwarmingsstaaf volledig laten afkoelen.
- Verwarmingsstaaf eruit schroeven.
- Afdichtingsring eruit schroeven.
- Verwarmingsstaaf terugplaatsen.

6 Functiecontrole

Voer na ieder hygiënische voorbereiding, na ieder reparatie, echter tenminste iedere 6 maanden een functiecontrole uit.

- Delen van de behuizing op scheuren en beschadigingen controleren. Indien noodzakelijk: beschadigde delen vervangen.
- De ademluchtbevochtiger tot de markering met water vullen (zie afb. 1A of 1B)
- Controleer of de ademluchtbevochtiger dicht is. Indien noodzakelijk: beschadigde delen vervangen.
- Ademluchtbevochtiger met 200 ml water vullen.
- De ademluchtbevochtiger op het therapieapparaat aansluiten en inschakelen.
- Verwarmingscapaciteit op de hoogste stand zetten.
- Controleer of de ademluchtbevochtiger verwarmt.
- Wanneer de ademluchtbevochtiger zich na 10 minuten niet licht verwarmt: Contact opnemen met de vakhandel.

7 Stringen

| Storing | Oorzaak | Verhelpen |
|--|---|---|
| De ademluchtbevochtiger wordt niet warm. | Bevochtigerstand uitgeschakeld. Ademluchtbevochtiger defect. | Bevochtigerstand instellen. De ademluchtbevochtiger laten repareren. |
| De ademluchtbevochtiger is lek. | De afdichting van de verwarmingsstaaf is defect. | Afdichting vervangen (zie 5.2). |
| | Bevochtigerinzetstuk niet correct geplaatst. | Bevochtigerinzetstuk correct plaatsen. |
| | Bevochtigerinzetstuk is defect. | Bevochtigerinzetstuk vervangen. |
| De ademluchtbevochtiger schakelt uit. | Scheuren in ondergedeelte bevochtigerinzetstuk. | Ondergedeelte bevochtigerinzetstuk vervangen. |
| | De ademluchtbevochtiger is leeg. | De ademluchtbevochtiger met water vullen. |

8 Onderhoud

Bij reglementaire toepassing (zie "2.1 Toepassingsdoel") is de ademluchtbevochtiger onderhoudsvrij.

9.1 Accessori e parti di ricambio

In caso di necessità è possibile ordinare gli accessori e le parti di ricambio separatamente. Un elenco aggiornato è reperibile in Internet o presso il proprio rivenditore specializzato.

10 Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Classe del prodotto secondo la direttiva 93/42/CEE | IIa |
| Dimensioni L x A x P in cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Peso (senza acqua) | 0,6 kg |
| Range di temperatura Funzionamento Stoccaggio | da +5 °C a +37 °C da -25 °C a +70 °C |
| Umidità ammessa per funzionamento e stoccaggio | Da 15 a 93 %, senza formazione di condensa |
| Campo di pressione aria | 600 hPa-1100 hPa, pari a un'altitudine di 4000 m slm |
| Potenza elettrica | Max. 30 VA (solo in abbinamento a un apparecchio autorizzato) |
| Classificazione ai sensi della norma EN 60601-1-11: Tipo di protezione contro scosse elettriche Grado di protezione contro scosse elettriche Protezione contro la penetrazione di acqua e corpi solidi | Classe di protezione II Tipo BF IP22 |
| Classificazione secondo DIN EN 60601-1: Modo operativo | Funzionamento continuo |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) secondo DIN EN 60601-1-2 Scherma contro i radiodisturbi Resistenza ai radiodisturbi (Se necessario, è possibile richiedere al costruttore i parametri di collaudo e i valori limite) | PEN 55011 B IEC 61000-4 parti dalla 2 alla 6, parte 11, parte 8 EN 61000-3, parti 2 e 3 |
| Riscaldamento dell'aria inalata | Max. +3 °C |
| Umidificazione dell'aria inalata secondo ISO 8185 con livello di umidificazione 7 senza tubo flessibile riscaldabile a 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |

| | |
|--|---|
| Umidificazione dell'aria inalata secondo ISO 8185 con livello di umidificazione 7 con tubo flessibile riscaldabile a 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Volume di riempimento max. | 400 ml |
| Caduta pressione | La caduta pressione mediante combinazione di apparecchio terapeutico WM 100 TD e umidificatore WM 100 TH non aumenta. |
| Flusso massimo | 248 l/min |
| Pressione di esercizio max. ammessa | 50 hPa |
| Perdite di gas alla pressione di esercizio max. | 0,0 l/min |
| WM 100 TH combinabile con | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Con riserva di modifiche costruttive

11 Garanzia

Informazioni sulle condizioni di garanzia sono contenute nelle istruzioni d'uso dell'apparecchio terapeutico.

12 Dichiarazione di conformità

Informazioni sulla dichiarazione di conformità sono contenute nelle istruzioni d'uso dell'apparecchio terapeutico.

1 Funzionamento / legenda

Le figure seguenti mostrano come riempire, collegare e rimuovere l'umidificatore:

- 1A** Riempimento dell'umidificatore
- 1B** Riempimento dell'umidificatore (alternativa a1)
- 2** Collegamento dell'umidificatore
- 3** Rimozione dell'umidificatore.
- 4** Smontaggio dell'umidificatore.
- 5** Assemblaggio dell'umidificatore.
- 6** Sostituzione della guarnizione dell'asta riscaldante.

Impostazione dell'umidificatore sull'apparecchio terapeutico: il funzionamento varia a seconda dell'apparecchio terapeutico utilizzato. Osservare le istruzioni d'uso del proprio apparecchio terapeutico.

2 Introduzione

2.1 Impiego previsto

L'umidificatore WM 100 TH riscalda e umidifica l'aria inalata e impedisce che le mucose delle vie aeree si seccino. Può essere utilizzato nelle cliniche e in ambito domestico.

2.2 Descrizione del funzionamento

L'umidificatore funziona in base al principio di pass-over. L'aria viene convogliata sulla superficie dell'acqua calda. In questo modo, l'umidità relativa e la temperatura del flusso d'aria aumentano. Il riscaldamento dell'apparecchio terapeutico è impostabile in livelli.

2.3 Indicazioni

Alte vie respiratorie secche e aria inalata percepita come troppo fredda. prismaAQUA può essere utilizzato solo dietro prescrizione medica.

2.4 Controindicazioni

L'umidificatore non deve essere impiegato su pazienti con by-pass delle alte vie respiratorie.

2.5 Effetti collaterali

Non sono noti effetti collaterali.

3 Sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso. Esse costituiscono parte integrante dell'umidificatore e devono essere tenute sempre a portata di mano. Conformemente ai requisiti della direttiva 93/42/CEE, rispettare le seguenti indicazioni.

Pericolo di infezione dovuto ai germi che si formano nell'acqua ferma!

Nell'acqua ferma germi e batteri si insediano e proliferano facilmente.

⇒ Pulire regolarmente l'umidificatore.

⇒ Utilizzare l'umidificatore solo con acqua fresca.

Pericolo di lesioni dovuto all'utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle condizioni ambiente prescritte

L'utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle condizioni ambiente prescritte può portare al mancato rispetto delle tolleranze con guasto dell'apparecchio e lesioni al paziente.

⇒ Utilizzare l'apparecchio soltanto entro le condizioni ambiente prescritte (ved. "10 Dati tecnici").

Danni materiali causati da sovrariempimento!

L'acqua in eccesso può penetrare nell'apparecchio e danneggiarlo.

⇒ Rimuovere l'umidificatore dall'apparecchio prima del riempimento.

⇒ Riempire l'umidificatore solo fino al contrassegno max.

Danni materiali causati da acqua bollente e additivi aromatici!

Acqua bollente e additivi aromatici (ad es. olio di eucalipto) possono danneggiare l'alloggiamento dell'umidificatore e l'asta riscaldante.

⇒ Non riempire con acqua calda.

⇒ Non utilizzare additivi aromatici.

3.1 Indicazioni generali

- L'utilizzo di acqua sterile o bollita in ambito domestico è consentito solo in casi clinici eccezionali. Non utilizzare acqua distillata per impieghi specifici in quanto potrebbe non essere microbiologicamente pura.
- Al fine di evitare infezione, contaminazione batterica o compromissione del normale funzionamento dell'apparecchio, rispettare quanto indicato alla sezione "Trattamento igienico" (ved. "5 Trattamento igienico").

- L'impiego di articoli di altri produttori potrebbe causare anomalie di funzionamento e un' idoneità all'uso limitata. Inoltre, i requisiti di biocompatibilità potrebbero non essere soddisfatti. In caso di utilizzo di accessori diversi da quelli consigliati nelle istruzioni d'uso e di parti di ricambio non originali decade qualsiasi responsabilità e non verrà quindi riconosciuto il diritto alla garanzia.

4 Descrizione del prodotto

4.1 Panoramica

La rappresentazione dei singoli componenti è riportata sul frontespizio.

Legenda

- Parte superiore umidificatore
- Inserto umidificatore
- Parte inferiore umidificatore
- Foro di ingresso
- Foro di uscita
- Asta riscaldante

4.2 Contrassegni e simboli

| Posizione | Simbolo | Descrizione |
|-----------|---------|--|
| 4 | | Riempire con acqua. |
| 6 | | L'umidificatore è caldo. Non toccare l'asta riscaldante. |

4.3 Simboli sulla targhetta dell'apparecchio

| | |
|----------------|--|
| | Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici. |
| CE 0197 | Marchio CE (conferma che il prodotto è conforme alle direttive europee vigenti). |
| 32 V CC | 32 V tensione continua |
| | Parte applicata tipo BF |
| IP22 | Classe di protezione IP: grado di protezione contro corpi estranei solidi. L'apparecchio è protetto dagli schizzi d'acqua. |

| | |
|--------------------------|--|
| >PC< | Denominazione del materiale: Policarbonato |
| | Data di produzione (mese / anno) |
| Tipo: WM100TH | Denominazione del tipo: apparecchio di WM 100 TH |
| | Attenersi alle istruzioni d'uso. |
| SN | Numero di serie |

5 Trattamento igienico

Pulire settimanalmente l'umidificatore e disinfettarlo in ambito clinico. All'occorrenza decalcificare l'umidificatore (ved. "5.1 Decalcificazione dell'umidificatore"). Sostituire i componenti del corpo se danneggiati (formazione di incrinature). Se si utilizza l'apparecchio terapeutico o l'umidificatore senza filtro antibatterico, in caso di cambio del paziente fare eseguire un trattamento igienico professionale dal rivenditore specializzato.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni per asta riscaldante rovente!

Durante e subito dopo l'uso l'asta riscaldante è rovente e può provocare ustioni se toccata.

⇒ Lasciare raffreddare completamente l'asta riscaldante.

- Scomposizione dell'umidificatore (fig. 4).
- Eseguire il trattamento igienico dell'umidificatore attenendosi alla seguente tabella. Non è ammessa alcuna sterilizzazione.

| Componente | Pulizia | Disinfezione |
|-------------------------------|---|---|
| Parte inferiore umidificatore | Con acqua calda e detergente. Consiglio: pulire settimanalmente nel cestello superiore della lavastoviglie (max. 65 °C). | Disinfezione per immersione (Consiglio: gigasept FF®) / fare bollire per 5 minuti |
| Inserto umidificatore | Se necessario: decalcificare (ved. 5.1) | Fare bollire per 5 minuti |
| Parte superiore umidificatore | Lavare utilizzando: acqua o sapone delicato; non utilizzare panni in microfibra | Disinfezione per strofinamento (consiglio: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |

| Componente | Pulizia | Disinfezione |
|------------------|---|---|
| Asta riscaldante | Se necessario: decalcificare (ved. 5.1) | Disinfezione per immersione (consiglio: gigasept FF®) Disinfezione per nebulizzazione (consiglio: perform advanced) o far bollire per 5 minuti |

- Sciacquare con acqua pulita e asciugare.
- Eseguire un controllo visivo.
- Se necessario: sostituire i componenti danneggiati.
- Rimontare l'umidificatore (fig. 6).

5.1 Decalcificazione dell'umidificatore

- Rimuovere l'umidificatore dall'apparecchio terapeutico (fig. 4).
- Scomposizione dell'umidificatore (fig. 4).
- Versare 300 ml di aceto puro per uso domestico (soluzione al 5% senza additivi) nella parte inferiore dell'umidificatore.
- Collocare l'inserto umidificatore in un recipiente con aceto puro per uso domestico (soluzione al 5% senza additivi). L'inserto umidificatore deve essere interamente ricoperto dall'aceto.
- Lasciare agire l'aceto per 1 ora.
- Risciacquare la parte inferiore dell'umidificatore, l'asta riscaldante e l'inserto umidificatore con acqua pulita.
- Asciugare con cura la parte inferiore dell'umidificatore, l'asta riscaldante e l'inserto umidificatore.
- Rimontare l'umidificatore (fig. 5).

5.2 Sostituzione della guarnizione dell'asta riscaldante (fig. 6)

- Se necessario: Lasciare raffreddare completamente l'asta riscaldante.
- Svitare l'asta riscaldante.
- Sostituire l'anello di tenuta.
- Reinserire l'asta riscaldante.

6 Controllo funzionale

Dopo ogni trattamento igienico così come dopo ogni manutenzione, al più tardi tuttavia dopo 6 mesi, effettuare un controllo funzionale.

- Controllare che i componenti del corpo non presentino crepe e non siano danneggiati. Se necessario: sostituire i componenti danneggiati.
- Riempire con acqua l'umidificatore fino a raggiungere la tacca (ved. fig. 1A o 1B)
- Controllare la tenuta dell'umidificatore dell'aria inalata. Se necessario: sostituire i componenti danneggiati.
- Riempire l'umidificatore con 200 ml di acqua.
- Collegare l'umidificatore all'apparecchio terapeutico e accenderlo.
- Impostare il riscaldamento sul livello più alto.
- Verificare che l'umidificatore si riscaldi.
- Se dopo 10 minuti l'umidificatore non è neppure leggermente caldo: contattare il rivenditore specializzato.

7 Anomalie

| Anomalia | Causa | Soluzione |
|----------------------------------|---|---|
| L'umidificatore non si riscalda. | Disattivare il livello di umidificazione. | Regolare il livello di umidificazione. |
| | L'umidificatore è difettoso. | Fare riparare l'umidificatore. |
| L'umidificatore non è a tenuta. | La guarnizione dell'asta riscaldante è difettosa. | Sostituire la guarnizione (ved. 5.2). |
| | Inserto umidificatore non inserito correttamente. | Inserire correttamente l'inserto umidificatore. |
| | L'inserto umidificatore è difettoso. | Sostituire l'inserto umidificatore. |
| L'umidificatore si spegne. | Incrinature nella parte inferiore dell'umidificatore. | Sostituire la parte inferiore dell'umidificatore. |
| | L'umidificatore è vuoto. | Riempire l'umidificatore con acqua. |

8 Manutenzione

Se utilizzato in modo conforme (ved. "2.1 Impiego previsto") l'umidificatore è esente da manutenzione.

9 Materiale in dotazione

prismaAQUA, nero - WM 29680

prismaAQUA, bianco - WM 29490

8 Bakım

Amaca uygun kullanım halinde (bakınız "2.1 Kullanım amacı") solunum havası nemlendiricisi bakım gerektirmez.

9 Teslimat kapsamı

prismaAQUA, siyah - WM 29680

prismaAQUA, beyaz - WM 29490

9.1 Aksesuar ve yedek parçalar

Gerek duyduğunuzda aksesuar parçalarını ve yedek parçaları ayrı olarak sipariş edebilirsiniz. Güncelleştirilmiş bir listeyi İnternet veya yetkili satıcınız üzerinden alabilirsiniz.

10 Teknik veriler

| | |
|--|---|
| 93/42/EEC uyarınca ürün sınıfı | IIa |
| Ölçüler G x Y x D [cm] | 14 x 13,5 x 18 |
| Ağırlık (susuz) | 0,6 kg |
| Isı derecesi aralığı Çalıştırma Depolama | +5 °C ila +37 °C -25 °C ila +70 °C |
| Çalıştırma ve depolama esnasındaki izin verilen nem oranı | % 15 ila % 95 arasında, yoğunlaşmaz |
| Hava basıncı aralığı | 600 hPa-1100 hPa, bu değer deniz seviyesinden 4000 m yüksekliğe eşittir |
| Elektrik gücü | Azm. 30 VA (sadece izin verilen cihaz ile kombine edilmesi halinde) |
| EN 60601-1-11 standardına göre sınıflandırma: Elektrik çarpmasına karşı koruma türü Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi İçine zararlı su ve katı maddeler girmesine karşı koruma | Koruma sınıfı II Model BF IP22 |
| DIN EN 60601-1 standardına göre sınıflandırma: Çalıştırma şekli | Süreklili çalışma |
| Elektromanyetik uyumluluk (EMC) DIN EN 60601-1-2 standardına göre Girişim bastırma Radyo paraziti bağımsızlığı (Kontrol parametreleri ve sınır değerler gerektiğinde üreticiden talep edilebilir) | PEN 55011 B IEC 61000-4 Bölüm 2 - 6, Bölüm 11, Bölüm 8 IEC 61000-3 Bölüm 2 ve 3 |

| | |
|--|---|
| Solunum havasının ısıtılması | Azm. +3 °C |
| ISO 8185 standardına göre nemlendirme sınıfı 7'de ısıtılabilen hortum olmadan 23 °C sıcaklıkta solunum havası nemlendirici sistemi nem çıkış miktarı - 5 hPa (12,2 l/dk) - 10 hPa (18 l/dk) - 20 hPa (25,9 l/dk) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| ISO 8185 standardına göre nemlendirme sınıfı 7'de ısıtılabilen hortum ile birlikte 23 °C sıcaklıkta solunum havası nemlendirici sistemi nem çıkış miktarı - 5 hPa (12,2 l/dk) - 10 hPa (18 l/dk) - 20 hPa (25,9 l/dk) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Azm. doldurma hacmi | 400 ml |
| Basınç düşüşü | Terapi cihazı WM 100 TD ve solunum havası nemlendiricisi WM 100 TH cihaz kombinasyonu üzerinden söz konusu olan basınç düşüşü yükselmez. |
| Azami akış | 248 l/dk |
| Azm. izin verilen çalışma basıncı | 50 hPa |
| Azm. çalışma basıncında gaz kaçacağı | 0,0 l/dk |
| WM 100 TH, müteakip modeller ile kombine edilebilir | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Yapısal değişiklik yapma hakkı saklıdır

11 Garanti

Garanti koşulları ile ilgili bilgiler için terapi cihazınızın kullanma talimatına bakabilirsiniz.

12 Uygunluk beyanı

Uygunluk beyanı ile ilgili bilgiler için terapi cihazınızın kullanma talimatına bakabilirsiniz.

1 Kullanılması / Lejant

Solunum havası nemlendiricisini nasıl dolduracağınızı, monte edeceğinizi ve sökeceğinizi görmek için lütfen ilgili resimlere bakınız:

- 1A Solunum havası nemlendiricisinin doldurulması
- 1B Solunum havası nemlendiricisinin doldurulması (1 için alternatif)
- 2 Solunum havası nemlendiricisinin monte edilmesi
- 3 Solunum havası nemlendiricisinin sökülmesi
- 4 Solunum havası nemlendiricisinin parçalarına ayrılması
- 5 Solunum havası nemlendiricisinin tekrar toplanması
- 6 Isıtma çubuğu contasının değiştirilmesi

Solunum havası nemlendiricisinin terapi cihazında ayarlanması: Kullanılan terapi cihazına bağlı olarak, sistemin kullanımı da farklıdır. Lütfen terapi cihazınızın kullanma kılavuzunu dikkate alın.

2 Giriş

2.1 Kullanım amacı

Solunum havası nemlendiricisi WM 100 TH solunum havasını ısıtır, nemlendirir ve bu sayede solunum yollarındaki mukoza tabakalarının kurummasını önler. Bu donanım, klinik türü kurumlarda ve evde kullanılabilir.

2.2 İşlev açıklamaları

Isıtılabilen solunum havası nemlendirici, pass-over olarak adlandırılan üzerinden geçme prensibine göre çalışır. Cihaza giren hava, sıcak suyun yüzeyi üzerinden geçirilir. Bu esnada, hava akımının bağıl nem oranı ve ısı derecesi yükselir. Isıtma gücü terapi cihazında kademeler halinde ayarlanabilir.

2.3 Endikasyonlar

Üst solunum yollarının kuru olması ve solunum havasının çok soğuk olarak algılanması. prismaAQUA cihazı sadece bir doktorun tavsiyesi üzerine kullanılabilir.

2.4 Kontrendikasyonlar

Solunum havası nemlendiricisi, üst solunum yolları bir baypas üzerinden devre dışı bırakılmış hastalarda kullanılmamalıdır.

2.5 Yan etkiler

Her hangi bir yan etki bilinmemektedir.

3 Güvenlik

İşbu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma talimatı, solunum havası nemlendiricisinin kbr parçası olup, her zaman kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Avrupa Birliği'nin 93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, müteakip hususları dikkate alın.

Durgun sudaki mikroplardan kaynaklanan enfeksiyon tehlikesi!

Durgun suda mikroplar ve bakteriler kolayca yerleşme olanağı bulur ve çoğalır.
⇒ Solunum havası nemlendiricisini muntazam aralıklar ile temizleyiniz.
⇒ Solunum havası nemlendiricisini sadece taze ve temiz su ile kullanınız.

Cihazın öngörülmesi çevre koşulları dışında kullanılması yaralanma tehlikesine yol açabilir

Chazin öngörülmesi çevre koşulları dışında kullanılması, gerekli toleranslara uyulmamasına, cihazın bozulmasına veya devre dışı kalmasına ve hastanın yaralanmasına neden olabilir.
⇒ Chazi sadece öngörülmesi çevre koşulları dâhilinde çalıştırınız (bakınız "10 Teknik veriler").

Aşırı doldurma nedeniyle maddi hasar!

Dışarı taşan su, cihazın içine akabilir ve cihaza zarar verebilir.
⇒ Doldurma işleminden önce solunum havası nemlendiricisini cihazdan söküp çıkarınız.
⇒ Solunum havası nemlendiricisini sadece max, yani azami işaretime kadar doldurunuz.

Sıcak su ve aromatik katkı maddeleri nedeniyle maddi hasar!

Sıcak su veya aromatik katkı maddeleri (örn. okaliptus yağı), solunum havası nemlendiricisinin gövdesine ve ısıtma çubuğuna zarar verebilir.
⇒ Sıcak su doldurmayınız.
⇒ Aromatik katkı maddeleri kullanmayınız.

3.1 Genel bilgiler

- Evde kullanma durumunda, steril veya kaynatılmış su kullanılması tıbbi açıdan sadece istisna durumlarda gereklidir. Teknik kullanım için öngörülmesi damıtık su kullanmayınız, çünkü damıtık suda mikrobiyolojik kontaminasyon söz konusu olabilir.
- Bir enfeksiyonu, bakteriyel kontaminasyonu veya işlev bozukluklarını önlemek için, Hijyenik hazırlama adlı bölümü dikkate alınız (bakınız "5 Hijyenik hazırlama işlemleri").

- Başka üreticilere ait ürünlerin kullanılması, işlev bozukluklarına ve kullanılabilirliğin kısıtlı olmasına yol açabilir. Ayrıca biyolojik uyumluluk ile ilgili gereklilikler yerine getirilmemiş olabilir. Eğer ne kullanma talimatında önerilen aksesuarlar, ne de orijinal yedek parçalar kullanılırsa, bu durumlar ile ilgili hiçbir garanti hakkından ve sorumluluk hükümlerinden yararlanılamayacağını dikkate alınız.

4 Ürünün tarifi

4.1 Genel bakış

Cihaz öğelerinin görünüşleri için kapak sayfasına bakınız.

Lejant

- Nemlendirici üst parçası
- Nemlendirici parçası
- Nemlendirici alt parçası
- Giriş deliği
- Çıkış deliği
- Isıtma çubuğu

4.2 Tanımlar ve semboller

| Konum | Sembol | Açıklama |
|-------|--------|---|
| 4 | | Su doldurunuz. |
| 6 | | Solunum havası nemlendiricisi ısıtılmıştır. Isıtma çubuğuna dokunmayınız. |

4.3 Cihaz levhası üzerindeki semboller

| | |
|-------------------|---|
| | Cihazı evsel atıklar üzerinden imha etmeyiniz. |
| CE 0197 | CE işareti (ürünün geçerli Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olduğunu onaylar) |
| 32 V DC | 32 V doğrusal gerilim |
| | BF tipi uygulama ünitesi |
| IP22 | IP koruma sınıfı: Katı yabancı maddelere karşı koruma derecesi. Cihaz, damlayan suya karşı korunmuştur. |
| >PC< | Malzeme tanımı: Polikarbonat |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| | Üretim tarihi (ay / yıl) |
| Model: WM100TH | Model tanımı: Cihaz modeli WM 100 TH |
| | Kullanma talimatını dikkate alınız. |
| SN | Seri numarası |

5 Hijyenik hazırlama işlemleri

Solunum havası nemlendiricisini haftada bir kez temizleyiniz ya da klinikte kullanım halinde dezenfekte ediniz. Gerekliğinde solunum havası nemlendiricisini kireçten arındırınız (bakınız 5.1). Gövde parçaları kötü bir durumda (çatlamlar) olduğunda değiştirerek yenileyiniz. Eğer terapi cihazı veya solunum havası nemlendiricisi bir bakteri filtresi olmadan kullanıldıysa, başka bir hastada kullanılmadan önce yetki satıcı tarafından profesyonel bir hijyenik hazırlama işleminden geçirilmelidir.

| UYARI |
|---|
| Sıcak ısıtma çubuğu nedeniyle yaralanma tehlikesi! Kullanım esnasında ve kullanımdan kısa süre sonra ısıtma çubuğu sıcaktır ve dokunulması halinde yanıklara neden olabilir. ⇒ Isıtma çubuğunun tamamen soğumasını bekleyiniz. |

- Solunum havası nemlendiricisini parçalarına ayırınız (Res. 4).
- Solunum havası nemlendiricisini aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde hijyenik hazırlama işleminden geçirin. Sterilizasyon yapılmaması yasaktır.

| Parça | Temizlik | Dezenfeksiyon |
|--------------------------|--|--|
| Nemlendirici alt parçası | Sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanılmalıdır. Öneri: Haftada bir kez bulaşık makinesinin üst sepeti içinde (azm. 65 °C) yıkayıp temizleyiniz. | Daldırma usulü dezenfeksiyon (Öneri: gigasept FF®) / 5 dakika kaynatınız |
| Nemlendirici parçası | Gerekli olması halinde: Kireçten arındırınız (bakınız 5.1) | 5 dakika kaynatınız |
| Nemlendirici üst parçası | Nemli bez ile siliniz: Su veya keskin olmayan sabun kullanınız; mikrofiber bez kullanmayınız | Silerek dezenfeksiyon (Öneri: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |

| Parça | Temizlik | Dezenfeksiyon |
|---------------|--|--|
| Isıtma çubuğu | Gerekli olması halinde: Kireçten arındırınız (bakınız 5.1) | Daldırma usulü dezenfeksiyon (Öneri: gigasept FF®) / 5 dakika kaynatınız Püskürtme usulü dezenfeksiyon (Öneri: perform advanced) veya 5 dakika kaynatınız |

- Parçaları temiz su ile durulayınız ve silerek kurutunuz.
- Görsel kontrolden geçirin.
- Gerekli olması halinde: Hasarlı parçaları değiştiriniz.
- Solunum havası nemlendiricisini yeniden toplayınız (Res. 6).

5.1 Solunum havası nemlendiricisinin kireçten arındırılması

- Solunum havası nemlendiricisini terapi cihazından söküp alınız (Res. 4).
- Solunum havası nemlendiricisini parçalarına ayırınız (Res. 4).
- 300 ml saf sirkeyi (%5 çözelti, katkı maddeleri yok) nemlendirici alt parçasına doldurunuz.
- Nemlendirici parçasını, içine saf sirke (%5 çözelti, katkı maddeleri yok) doldurduğunuz bir kabin içine yerleştiriniz. Nemlendirici parçası tamamı sirke içinde olmalıdır.
- Sirkenin etki etmesi için 1 saat bekleyiniz.
- Nemlendirici alt parçasını, ısıtma çubuğunu ve nemlendirici parçasını temiz su ile durulayınız.
- Nemlendirici alt parçasını, ısıtma çubuğunu ve nemlendirici parçasını itinayla silip kurutunuz.
- Solunum havası nemlendiricisini yeniden toplayınız (bakınız Res. 5).

5.2 Isıtma çubuğu contasının değiştirilmesi (Res. 6)

- Gerekli olması halinde: Isıtma çubuğunun tamamen soğumasını bekleyiniz.
- Isıtma çubuğunu söküp çıkarınız.
- Contayı değiştiriniz.
- Isıtma çubuğunu yeniden yerine takınız.

6 İşlev kontrolü

Her hijyenik hazırlama işleminden sonra ve her bakım ve onarım çalışmasından sonra, keza en az her 6 ayda bir işlev kontrolü yapınız.

- Gövde parçalarında çatlaklık ve hasar kontrolü yapınız. Gerekli olması halinde: Hasarlı parçaları değiştiriniz.
- Solunum havası nemlendiricisine ilgili azami işaretine kadar su doldurunuz (bakınız Res. 1A) veya 1B)
- Solunum havası nemlendiricisinde kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekli olması halinde: Hasarlı parçaları değiştiriniz.
- Solunum havası nemlendiricisine 200 ml su doldurunuz.
- Solunum havası nemlendiricisini terapi cihazına bağlayınız ve devreye sokunuz.
- Isıtma gücünü en yüksek kademeye ayarlayınız.
- Solunum havası nemlendiricisinin ısınıp ısınmadığını kontrol ediniz.
- Eğer solunum havası nemlendiricisi 10 dakika sonra hafif ısınmazsa: Yetkili satıcıya başvurunuz.

7 Arızalar

| Arıza | Nedeni | Giderilmesi |
|---|---|---|
| Solunum havası nemlendiricisi ısınmıyor. | Nemlendirici kademesini kapatınız. Solunum havası nemlendiricisi bozuk. | Nemlendirici kademesini ayarlayınız. Solunum havası nemlendiricisinin onarılmasını sağlayınız. |
| Solunum havası nemlendiricisinde kaçak var. | Isıtma çubuğunun contası bozuk veya hasarlı. Nemlendirici parçası yerine doğru yerleştirilmemiş. Nemlendirici parçası bozuk. Nemlendirici alt parçasında çatlaklıklar var. | Contayı değiştiriniz (bakınız 5.2). Nemlendirici parçasını yerine doğru yerleştiriniz. Nemlendirici parçasını değiştiriniz. Nemlendirici alt parçasını değiştiriniz. |
| Solunum havası nemlendiricisi kapanyor. | Solunum havası nemlendiricisi boş. | Solunum havası nemlendiricisine su doldurunuz. |

8 Mantenimiento

En caso de uso conforme a lo dispuesto, (véase "2.1 Finalidad de uso") el humidificador del aire de respiración no requiere mantenimiento alguno.

9 Volumen de suministro

prismaAQUA, negro - WM 29680
prismaAQUA, blanco - WM 29490

9.1 Accesorios y piezas de repuesto

Los accesorios y las piezas de repuesto se pueden pedir por separado si es necesario. Puede obtener una lista actual en Internet o a través de su distribuidor autorizado.

10 Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Clase de producto según 93/42/CEE | Ila |
| Dimensiones An x Al x P en cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Peso (sin agua) | 0,6 kg |
| Margen de temperatura Funcionamiento Almacenamiento | +5 °C a +37 °C -25 °C a +70 °C |
| Humedad admisible, funcionamiento y almacenamiento | 15 % a 93 %, sin condensación |
| Margen de presión atmosférica | 600 hPa-1100 hPa, equivalente a una altitud de 4000 m sobre el nivel del mar |
| Potencia eléctrica | Máx. 30 VA (solo en combinación con el aparato homologado) |
| Clasificación según EN 60601-1-11: Tipo de protección contra descargas eléctricas Grado de protección contra descargas eléctricas Protección contra la penetración dañina de agua y sustancias sólidas | Clase de protección II Tipo BF IP22 |
| Clasificación según DIN EN 60601-1: Modo operativo | Funcionamiento continuo |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) según DIN EN 60601-1-2 Supresión de interferencias Inmunidad a las interferencias (En caso de necesidad, los parámetros de comprobación y los valores límite se pueden solicitar al fabricante) | PEN 55011 B IEC 61000-4 Parte 2 a 6, Parte 11, Parte 8 IEC 61000-3 Parte 2 y 3 |
| Calentamiento del aire de respiración | Máx. +3 °C |

| | |
|--|---|
| Emisión del sistema de humidificador del aire de respiración según ISO 8185 en el nivel de humidificador 7 sin manguera calentable a 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Emisión del sistema de humidificador del aire de respiración según ISO 8185 en el nivel de humidificador 7 con manguera calentable a 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Volumen de llenado máx. | 400 ml |
| Caída de presión | La caída de presión no aumenta con la combinación del aparato de terapia WM 100 TD y del humidificador del aire de respiración WM 100 TH. |
| Flujo máximo | 248 l/min |
| Presión de servicio máx. admisible | 50 hPa |
| Fuga de gas con la presión de servicio máx. | 0,0 l/min |
| WM 100 TH con posibilidad de combinación con | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Salvo modificaciones constructivas

11 Garantía

Para información sobre las condiciones de garantía, consulte las instrucciones de uso del aparato de terapia.

12 Declaración de conformidad

Para información sobre la declaración de conformidad, consulte las instrucciones de uso del aparato de terapia.

WM 68250g 01/2026 ES-MX

1 Manejo / leyenda

Consulte las figuras para ver la manera de llenar, conectar y desmontar el humidificador del aire de respiración:

- 1A** Llenar el humidificador del aire de respiración
- 1B** Llenar el humidificador del aire de respiración (alternativa a 1)
- 2** Conectar el humidificador del aire de respiración
- 3** Quitar el humidificador del aire de respiración.
- 4** Desmontar el humidificador del aire de respiración.
- 5** Montar el humidificador del aire de respiración.
- 6** Cambiar la junta de la barra calentadora.

Colocar el humidificador del aire de respiración en el aparato de terapia: El manejo varía en función del aparato de terapia utilizado. Observe también las instrucciones de uso de su aparato de terapia.

2 Introducción

2.1 Finalidad de uso

El humidificador del aire de respiración WM 100 TH calienta y humidifica el aire de respiración, y así evita que se sequen las mucosas en las vías respiratorias. Se puede utilizar en establecimientos clínicos y en el ámbito doméstico.

2.2 Descripción del funcionamiento

El humidificador del aire de respiración con calefacción funciona según el principio Pass-over. El aire suministrado se conduce por la superficie de agua caliente. En consecuencia, aumentan la humedad relativa y la temperatura del flujo de aire. La potencia de calentamiento se puede ajustar en varios niveles en el aparato de terapia.

2.3 Indicaciones

Sequedad de las vías respiratorias superiores y percepción del aire de respiración como demasiado frío. prismaAQUA solo se debe utilizar según las recomendaciones de un médico.

2.4 Contraindicaciones

El humidificador del aire de respiración no se debe utilizar en pacientes cuyas vías respiratorias superiores sean eludidas con un bypass.

2.5 Efectos secundarios

No se conocen efectos secundarios.

3 Seguridad

Lea atentamente estas instrucciones de uso. Forman parte del humidificador del aire de respiración y deben estar disponibles en todo momento. Según la directiva 93/42/CEE, observe los siguientes puntos.

¡Peligro de infección por gérmenes en agua estancada!

En agua estancada pueden acumularse y proliferar fácilmente gérmenes y bacterias.
⇒ Limpiar regularmente el humidificador del aire de respiración.

⇒ Utilizar el humidificador del aire de respiración únicamente con agua fresca.

Peligro de lesiones al utilizar el aparato fuera de las condiciones ambientales prescritas

El uso del aparato fuera de las condiciones ambientales prescritas puede causar la superación de las tolerancias, el fallo del aparato y ocasionar lesiones al paciente.

⇒ Utilizar el aparato únicamente dentro de las condiciones ambientales prescritas (véase "10 Datos técnicos").

¡Daños materiales en caso de llenado excesivo!

El agua derramada puede penetrar en el aparato y dañarlo.

⇒ Quitar el humidificador del aire de respiración del aparato antes de llenarlo.

⇒ Llenar el humidificador del aire de respiración solo hasta la marca "máx."

¡Daños materiales en caso de utilizar agua caliente y aditivos aromáticos!

El agua caliente y los aditivos aromáticos (p. ej. aceite de eucalipto) pueden dañar la carcasa del humidificador del aire de respiración y la barra calentadora.

⇒ No introducir agua caliente.

⇒ No utilizar aditivos aromáticos.

3.1 Indicaciones generales

- En el uso doméstico, solo se requiere utilizar agua estéril o hervida en casos médicos excepcionales. No utilice agua destilada prevista para fines técnicos, ya que puede estar contaminada a nivel microbiológico.
- Con el fin de evitar una infección, una contaminación bacteriana o una perturbación del funcionamiento, observe las instrucciones contenidas en el capítulo Acondicionamiento higiénico (véase "5 Acondicionamiento higiénico").

- Si se utilizan artículos de otros fabricantes, pueden producirse fallos en el funcionamiento y limitarse la aptitud para el uso. Además, se pueden incumplir los requisitos de biocompatibilidad. Tenga en cuenta que en estos casos perderá cualquier derecho de garantía o de indemnización si no utiliza los accesorios recomendados en el manual de instrucciones ni las piezas de repuesto originales.

| | |
|--------------------------------|--|
| | Fecha de fabricación (mes / año) |
| Tipo: WM100TH | Denominación de tipo: aparato de WM 100 TH |
| | Observar las instrucciones de uso. |
| SN | Número de serie |

5 Acondicionamiento higiénico

Limpia el humidificador del aire de respiración semanalmente y desinfectarlo si se utiliza en el ámbito clínico. Si es necesario, descalcificar el humidificador del aire de respiración (véase "5.1 Descalcificar el humidificador del aire de respiración"). Sustituir los elementos de la carcasa si se encuentran en mal estado (formación de grietas). Si el aparato de terapia o el humidificador del aire de respiración se utilizan sin filtro de bacterias, se debe realizar un acondicionamiento higiénico profesional por un distribuidor especializado al cambiar de paciente.

⚠ ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones por la barra calentadora caliente!
 Durante el funcionamiento y poco tiempo después, la barra calentadora está caliente y puede causar quemaduras si se entra en contacto con ella.
 ⇒ Dejar que la barra calentadora se enfríe por completo.

1. Desmontar el humidificador del aire de respiración (Fig. 4).
2. Realizar el acondicionamiento higiénico del humidificador del aire de respiración según la siguiente tabla. No se permite esterilizarlo.

| Elemento | Limpieza | Desinfección |
|----------------------------------|---|---|
| Parte inferior del humidificador | Con agua caliente y detergente. Recomendación: limpiar semanalmente en la cesta superior del lavavajillas (máx. 65 °C). | Desinfección por inmersión (recomendación: gigasept FF®) / hervir 5 minutos |
| Inserto del humidificador | Si es necesario: descalcificar (véase 5.1) | Hervir 5 minutos |
| Parte superior del humidificador | Limpia con un paño húmedo: utilizar agua o jabón suave; no emplear un paño de microfibra | Desinfección por frotamiento (recomendación: terralin® protect / perform advanced alcohol EP) |

4 Descripción del producto

4.1 Vista general

La representación de los componentes individuales se encuentra en la cubierta.

Legenda

1. Parte superior del humidificador
2. Inserto del humidificador
3. Parte inferior del humidificador
4. Orificio de entrada
5. Orificio de salida
6. Barra calentadora

4.2 Identificación y símbolos

| Posición | Símbolo | Descripción |
|----------|---------|---|
| 4 | | Introducir agua. |
| 6 | | El humidificador del aire de respiración está calentado. No tocar la barra calentadora. |

4.3 Símbolos en la placa del aparato

| | |
|-------------------|--|
| | No tirar el aparato a la basura doméstica. |
| CE 0197 | Marca CE (confirma que el producto es conforme a las directivas europeas vigentes). |
| 32 V CC | Tensión continua de 32 V |
| | Unidad de aplicación tipo BF |
| IP22 | Clase de protección IP: Grado de protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos. El aparato está protegido contra goteo de agua. |
| >PC< | Denominación del material: policarbonato |

| Elemento | Limpieza | Desinfección |
|-------------------|--|---|
| Barra calentadora | Si es necesario: descalcificar (véase 5.1) | Desinfección por inmersión (recomendación: gigasept FF®) Desinfección por rociado (recomendación: perform advanced) o hervir 5 minutos |

3. Aclarar los elementos con agua limpia y séquelos.
4. Realizar una inspección visual.
5. Si es necesario: sustituir los elementos defectuosos.
6. Montar el humidificador del aire de respiración (Fig. 6).

5.1 Descalcificar el humidificador del aire de respiración

1. Retirar el humidificador del aire de respiración del aparato de terapia (Fig. 4).
2. Desmontar el humidificador del aire de respiración (Fig. 4).
3. Introducir 300 ml de vinagre doméstico puro (solución al 5 % sin aditivos) en la parte inferior del humidificador.
4. Colocar el inserto del humidificador en un cuenco con vinagre doméstico puro (solución al 5 % sin aditivos). El inserto del humidificador debe estar completamente cubierto de vinagre.
5. Dejar actuar el vinagre durante 1 hora.
6. Aclarar la parte inferior del humidificador, la barra calentadora y el inserto del humidificador con agua limpia.
7. Secar cuidadosamente la parte inferior del humidificador, la barra calentadora y el inserto del humidificador.
8. Montar el humidificador del aire de respiración (véase Fig. 5).

5.2 Cambiar la junta de la barra calentadora (Fig. 6)

1. Si es necesario: Dejar que la barra calentadora se enfríe por completo.
2. Desenroscar la barra calentadora.
3. Sustituir la junta anular.
4. Volver a insertar la barra calentadora.

6 Control del funcionamiento

Realice un control del funcionamiento después de cada acondicionamiento higiénico, después de cada reparación y al menos cada 6 meses.

1. Examinar los elementos de la carcasa para detectar eventuales grietas y defectos. Si es necesario: sustituir los elementos defectuosos.
2. Llenar el humidificador del aire de respiración hasta la marca con agua (véase Fig. 1A o 1B)
3. Controlar que el humidificador del aire de respiración sea estanco. Si es necesario: sustituir los elementos defectuosos.
4. Llenar el humidificador del aire de respiración con 200 ml de agua.
5. Conectar el humidificador del aire de respiración al aparato de terapia y encenderlo.
6. Ajustar la potencia de calentamiento al nivel máximo.
7. Comprobar si se calienta el humidificador del aire de respiración.
8. Si el humidificador del aire de respiración no se ha calentado ligeramente al cabo de 10 minutos: póngase en contacto con un distribuidor especializado.

7 Averías

| Avería | Causa | Solución |
|--|---|---|
| El humidificador del aire de respiración no se calienta. | Nivel de humidificador desconectado. Humidificador del aire de respiración defectuoso. | Ajustar el nivel de humidificador. Hacer reparar el humidificador del aire de respiración. |
| Humidificador del aire de respiración no estanco. | Junta de la barra calentadora defectuosa. | Sustituir la junta (véase 5.2). |
| | Inserto del humidificador no insertado correctamente. | Insertar correctamente el inserto del humidificador. |
| | Inserto del humidificador defectuoso. | Sustituir el inserto del humidificador. |
| El humidificador del aire de respiración se desconecta. | Grietas en la parte inferior del humidificador. | Sustituir la parte inferior del humidificador. |
| | El humidificador del aire de respiración está vacío. | Llenar el humidificador del aire de respiración con agua. |

| Пречка | Причина | Решение |
|---|--|---|
| Навлажнувачот на воздухот за дишење пропушта. | Заптивката на грејачот е неисправна. | Заменете ја заптивката (види 5.2). |
| | Влошката за навлажнувач не е правилно ставена. | Ставете ја правилно влошката за навлажнувач. |
| | Влошката за навлажнувач е неисправна. | Заменете ја влошката за навлажнувач. |
| | Пукнатини во долниот дел на навлажнувачот. | Заменете го долниот дел на навлажнувачот. |
| Навлажнувачот на воздухот за дишење се исклучува. | Навлажнувачот на воздухот за дишење е празен. | Наполнете го навлажнувачот на воздухот за дишење со вода. |

8 Одржување

При соодветна употреба (види „2.1 Намена“), навлажнувачот на воздухот за дишење не треба да се одржува.

9 Обем на испорака

prismaAQUA, црн - WM 29680

prismaAQUA, бел - WM 29490

9.1 Додатоци и резервни делови

По потреба, додатоците и резервните делови може да ги порачате посебно. Актуелна листа можете да добиете на интернет или преку вашиот специјализиран трговец.

10 Технички податоци

| | |
|---|---|
| Класа на производ според 93/42/EWG | IIa |
| Димензии Ш x В x Д во cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Тежина (без вода) | 0,6 kg |
| Температурен опсег Работа Складирање | +5 °C до +37 °C -25 °C до +70 °C |
| Дозволена влажност за работа и складирање | 15 % до 93 %, не кондензира |
| Опсег на воздушен притисок | 600 hPa -1100 hPa, соодветствува на висина од 4000 m над NN |
| Електрична моќност | Макс. 30 VA (само во комбинација со одобриениот уред) |

| | |
|---|---|
| Класификација според EN 60601-1-11: Вид на заштита од електричен удар Степен на заштита од електричен удар Заштита од штетно навлегување на вода и цврсти материји | Класа на заштита II Тип BF IP22 |
| Класификација според DIN EN 60601-1: Работен режим | Постојана работа |
| Електромагнетна подносливост (EMV) според DIN EN 60601-1-2 Радио пречки Отпорност на радио пречки (Параметрите за проверка и граничните вредности можат по потреба да се побараат кај производителот) | PEN 55011 B IEC 61000-4 дел 2 до 6, дел 11, дел 8 IEC 61000-3 дел 2 и 3 |
| Затоплување на воздухот за дишење | Макс. +3 °C |
| Емисија на систем за навлажнување на воздухот за дишење според ISO 8185 на степен на навлажнување 7 без загреано црево на 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Емисија на систем за навлажнување на воздухот за дишење според ISO 8185 на степен на навлажнување 7 со загреано црево на 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| макс. волумен на полнење | 400 ml |
| Опаѓање на притисокот | Опаѓањето на притисокот низ комбинацијата на уреди на уредот за терапија WM 100 TD и навлажнувачот на воздухот за дишење WM 100 TH не се зголемува. |
| Максимален проток | 248 l/min |
| Макс. дозволен работен притисок | 50 hPa |
| Истекување на гас при макс. работен притисок | 0,0 l/min |
| WM 100 TH може да се комбинира со | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Го задржуваме правото да правиме структурни измени

1 Ракување / легенда

Погледнете ги илустрациите за да дознаете како да го наполните, поврзете и извадите навлажнувачот на воздухот за дишење:

1A Полнење на навлажнувачот на воздухот за дишење

1B Полнење на навлажнувачот на воздухот за дишење (алтернатива за 1)

2 Приклучување на навлажнувачот на воздухот за дишење

3 Извадете го навлажнувачот на воздухот за дишење.

4 Расклопете го навлажнувачот на воздухот за дишење.

5 Склопете го навлажнувачот на воздухот за дишење.

6 Заменете ја заптивката на грејачот.

Поставување на навлажнувачот на воздухот за дишење на уредот за терапија: Ракувањето се разликува во зависност од употребениот уред за терапија. Имајте го предвид упатството за употреба на вашиот уред за терапија.

2 Вовед

2.1 Намена

Навлажнувачот на воздухот за дишење WM 100 TH го загрева и го навлажнува воздухот за дишење и притоа спречува сушење на слузокожата на респираторниот тракт. Тој може да се користи во клинички институции и во домашни услови.

2.2 Опис на функциите

Навлажнувачот на воздухот за дишење што може да се загрева функционира по принципот „Pass-over“. Доставуваниот воздух се пренесува преку површината на топла вода. Притоа се зголемува релативната влажност и температурата на воздушната струја. Јачината на греенењето на уредот за терапија се регулира во степени.

2.3 Индикации

Суви горни дишни патишта и чувство на премногу студен воздух за дишење. prismaAQUA смее да се користи само според препорака на лекар.

2.4 Контраиндикации

Навлажнувачот на воздухот за дишење не смее да се користи кај пациенти со бајпас на горните дишни патишта.

2.5 Нус појави

Не се познати нус појави.

3 Безбедност

Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба. Тоа е составен дел од навлажнувачот на воздухот за дишење и мора да биде достапно во секое време. Според Директивата 93/42/ EWG земете ги предвид следните точки.

Опасност од инфекции од микроби во застоена вода!

Микробите и бактериите лесно може да се населат и да се размножуваат во застоена вода.

⇒ Редовно чистете го навлажнувачот на воздухот за дишење.

⇒ Користете го навлажнувачот на воздухот за дишење само со свежа вода.

Опасност од повреда поради работа на уредот надвор од рамките на пропишаните услови на околината

Користењето на уредот надвор од пропишаните надворешни услови може да резултира со непочитување на толеранциите и дефект на уредот и да го повреди пациентот.

⇒ Ракувајте со уредот само во рамките на пропишаните услови на околината (види „10 Технички податоци“).

Материјални штети поради преполнување!

Водата што истекува може да навлезе во уредот и да го оштети.

⇒ Извадете го навлажнувачот на воздухот за дишење од уредот пред полнењето.

⇒ Полнете го навлажнувачот на воздухот за дишење само до ознаката „max“.

Материјални штети поради врела вода и ароматични додатоци!

Врелата вода или ароматичните адитиви (на пр. масло од еукалиптус) може да ги оштетат куќиштето на навлажнувачот на воздухот за дишење и грејниот елемент.

⇒ Не полнете врела вода.

⇒ Не користете ароматични додатоци.

3.1 Општи напомени

- Употребата на стерилна или зовриена вода во домашни услови е неопходна само во исклучителни медицински случаи. Не користете дестилирана вода наменета за технички цели бидејќи може да биде микробиолошки контаминирана.

- За избегнување инфекции или бактериска контаминација имајте го предвид поглавјето за хигиенска подготовка (види „5 Хигиенска подготовка“).

- При употребата на туѓи артикли може да дојде до дефекти на функциите и ограничена употребливост. Освен тоа, може да не се исполнети барањата за био-компатибилност. Имајте предвид дека во тие случаи се губи какво било право на барање гаранција, доколку не се користат ниту додатоците препорачани во упатството за употреба ниту оригиналните резервни делови.

4 Опис на производот


4.1 Преглед

Приказ на поединечните делови може да најдете на насловната страница.



Легенда



- Горен дел на навлажнувач
- Влошка за навлажнувач
- Долен дел на навлажнувач
- Влезен отвор
- Излезен отвор
- Грејач

4.2 Ознаки и симболи

| Позиција | Симбол | Опис |
|----------|---|--|
| 4 |  | Наполнете вода. |
| 6 |  | Навлажнувачот на воздух за дишење е загреан. Не допирајте го грејачот. |


4.3 Симболи на плочката на уредот

| | |
|---|--|
|  | Не одложувајте го уредот во домашниот отпад. |
|  | СЕ-ознака (потврдува дека производот соодветствува на важечките европски директиви). |
| 32 V DC | 32 V рамномерен напон |
|  | Дел за апликација тип BF |
| IP22 | IP-класа на заштита: степен на заштита од цврсти туѓи тела. Уредот е заштитен од капки вода. |
| >PC< | Ознака на материјалот: поликарбонат |

| | |
|---|--|
|  | Датум на производство (месец / година) |
| Тип: WM100TH | Ознака на типот: уред од WM 100 TH |
|  | Почитувајте го упатството за употреба. |
| SN | Сериски број |

5 Хигиенска подготовка

Чистете го седмично навлажнувачот на воздухот за дишење или дезинфицирајте го во клинички услови. Доколку е потребно, отстранете го бигорот од навлажнувачот на воздухот за дишење (види „5.1 Отстранување на бигорот од навлажнувачот на воздухот за дишење“). Заменете ги деловите од куќиштето во случај на лоша состојба (на пр. при создавање пукнатини). Доколку уредот за терапија или навлажнувачот на воздухот за дишење се користеле без бактериски филтер, специјализираниот трговец мора да направи професионална хигиенска подготовка при промена на пациенти.

|  ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ |
|---|
| Опасност од повреда од жешкиот грејач! За време на и кратко време по работата, грејачот е жешок и допирањето може да предизвика изгореници. ⇒ Оставете го грејачот целосно да се излади. |

- Расклопете го навлажнувачот на воздухот за дишење (сл. 4).
- Подгответе го хигиенски навлажнувачот на воздухот за дишење според следната табела. Не е дозволена стерилизација.

| Дел | Чистење | Дезинфекција |
|--------------------------|---|--|
| Долен дел на навлажнувач | Со топла вода и детергент. Препорака: миење седмично во горната корпа на машината за садови (макс. 65 °C). | Дезинфекција со потопување (препорака: gigasept FF®) / да изври 5 минути |
| Влошка за навлажнувач | Ако е потребно: отстранете го бигорот (види 5.1) | Да изври 5 минути |

| Дел | Чистење | Дезинфекција |
|--------------------------|--|--|
| Горен дел на навлажнувач | Влажно бришење: користете вода или благ сапун; не користете микро-фибер крпа | Дезинфекција со бришење (препорака: terralin® protect / perform advanced алкохол EP) |
| Грејач | Ако е потребно: отстранете го бигорот (види 5.1) | Дезинфекција со потопување (Препорака: gigasept FF®) Дезинфекција со прскање (препорака: perform advanced) или да изври 5 минути |

- Исплакнете ги деловите со чиста вода и исушете ги.
- Извршете визуелна проверка.
- Ако е потребно: заменете ги оштетените делови.
- Склопете го навлажнувачот на воздухот за дишење (сл. 6).

5.1 Отстранување на бигорот од навлажнувачот на воздухот за дишење

- Извадете го навлажнувачот на воздухот за дишење од уредот за терапија (сл. 4).
- Расклопете го навлажнувачот на воздухот за дишење (сл. 4).
- Истурете 300 ml чист оцет за домаќинство (5 % раствор без адитиви) во долниот дел на навлажнувачот.
- Ставете ја влошката за навлажнувач во сад со чист оцет за домаќинство (5 % раствор без адитиви). Влошката за навлажнувач мора да биде целосно покриена со оцет.
- Оставете го оцетот да дејствува 1 час.
- Исплакнете ги долниот дел на навлажнувачот, грејачот и влошката за навлажнувач со чиста вода.
- Внимателно исушете ги долниот дел на навлажнувачот, грејачот и влошката за навлажнувач.
- Склопете го навлажнувачот на воздухот за дишење (види сл. 5).

5.2 Замена на заптивката на грејачот (сл. 6)

- Ако е потребно: Оставете го грејачот целосно да се излади.
- Отшрафете го грејачот.
- Заменете го прстенот за заптивање.
- Ставете го повторно грејачот.

6 Контрола на функциите

После секоја хигиенска подготовка, после секое пуштање во употреба, најмалку на секои 6 месеци вршете контрола на функциите.

- Проверете ги деловите на куќиштето за пукнатини и оштетувања. Ако е потребно: заменете ги оштетените делови.
- Наполнете го навлажнувачот на воздухот за дишење до ознаката со вода (види сл. 1A или 1B).
- Проверете дали пропушта навлажнувачот на воздухот за дишење. Ако е потребно: заменете ги оштетените делови.
- Наполнете го навлажнувачот на воздухот за дишење со 200 ml вода.
- Приклучете го навлажнувачот на воздухот за дишење на уредот за терапија и вклучете го.
- Ставете ја јачината на греење на највисокиот степен.
- Проверете дали се загрева навлажнувачот на воздухот за дишење.
- Ако навлажнувачот на воздухот за дишење по 10 минути не се загрева малку: Контактирајте со стручен дилер.

7 Пречки

| Пречка | Причина | Решение |
|--|---|---|
| Навлажнувачот на воздухот за дишење не се загрева. | Степенот на навлажнување е исклучен. | Поставете го степенот на навлажнување. |
| | Навлажнувачот на воздухот за дишење е неисправен. | Поправете го навлажнувачот на воздухот за дишење. |

| | |
|--|---|
| Opseg temperature Rad Skladištenje | +5 °C do +37 °C -25 °C do +70 °C |
| Dozvoljena vlažnost za rad i skladištenje | 15% do 93%, bez kondenzacije |
| Opseg vazdušnog pritiska | 600 hPa do 1100 hPa, odgovara nadmorskoj visini od 4000 m |
| Električna snaga | Maks. 30 VA (samo u kombinaciji sa odobrenim aparatom) |
| Klasifikacija prema EN 60601-1-11: Klasa zaštite od strujnog udara Stepen zaštite od strujnog udara Zaštita od štetnog prodiranja vode i čvrstih materija | Klasa zaštite II Tip BF IP22 |
| Klasifikacija prema DIN EN 60601-1: Vrsta rada | Trajni rad |
| Elektromagnetna kompatibilnost (EMK) prema DIN EN 60601-1-2 Radio smetnje Otpornost na radio smetnje (parametre za ispitivanje i granične vrednosti, ukoliko je potrebno, možete da zatražite od proizvođača) | PEN 55011 B IEC 61000-4 deo 2 do 6, deo 11, deo 8 IEC 61000-3 deo 2 i 3 |
| Zagrevanje vazduha za disanje | Maks. +3 °C |
| Isporuka pritiska sistema ovlaživača vazduha prema ISO 8185 na 7. stepenu ovlaživača, bez creva sa mogućnošću grejanja i na temperaturi od 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Isporuka pritiska sistema ovlaživača vazduha prema ISO 8185 na 7. stepenu ovlaživača, sa crevom sa mogućnošću grejanja i na temperaturi od 23 °C - 5 hPa (12,2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25,9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Maks. zapremina punjenja | 400 ml |
| Pad pritiska | Pad pritiska preko kombinacije aparata za terapiju WM 100 TD i ovlaživača vazduha WM 100 TH se ne povećava. |
| Maksimalni protok | 248 l/min |

| | |
|---|--|
| Maks. dozvoljeni radni pritisak | 50 hPa |
| Curenje vazduha pri maks. radnom pritisku | 0,0 l/min |
| WM 100 TH se može kombinovati sa | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Zadržavamo pravo na promene konstrukcije

11 Garancija

Informacije o uslovima garancije možete da pronađete u uputstvu za upotrebu vašeg aparata za terapiju.

12 Izjava o usaglašenosti

Informacije o izjavi o usaglašenosti možete da pronađete u uputstvu za upotrebu vašeg aparata za terapiju.

1 Rukovanje/legenda

Način punjenja, priključivanja i skidanja ovlaživača vazduha možete da pronađete na slikama:

- 1A** Punjenje ovlaživača vazduha
- 1B** Punjenje ovlaživača vazduha (alternativa za 1)
- 2** Priključivanje ovlaživača vazduha
- 3** Skidanje ovlaživača vazduha.
- 4** Rastavljanje ovlaživača vazduha.
- 5** Sastavljanje ovlaživača vazduha.
- 6** Zamena zaptivke grejnog štapa.

Podešavanje ovlaživača vazduha na aparatu za terapiju: Rukovanje se razlikuje u zavisnosti od aparata za terapiju koji se koristi. Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu aparata za terapiju.

2 Uvod

2.1 Svrha upotrebe

Ovlaživač vazduha WM 100 TH zagreva i vlaži vazduh za disanje sprečavajući pritom da dođe do isušivanja sluzokože respiratornog sistema. Može da se koristi u kliničkim ustanovama i domaćinstvima.

2.2 Opis funkcija

Ovlaživač vazduha sa mogućnošću grejanja funkcioniše po principu provođenja. Dovedeni vazduh se provodi preko površine tople vode. Pritom se povećava relativna vlažnost vazduha i temperatura vazdušne struje. Snaga grejanja se može podesiti u stepenima na aparatu za terapiju.

2.3 Indikacije

Suvi gornji disajni putevi i osećaj da je vazduh previše hladan. prismaAQUA sme da se upotrebljava samo u skladu sa preporukom lekara.

2.4 Kontraindikacije

Ovlaživač vazduha ne sme da se koristi kod pacijenata čiji su gornji disajni putevi premošćeni bajpasom.

2.5 Neželjena dejstva

Neželjena dejstva nisu poznata.

3 Bezbednost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. Ono je sastavni deo ovlaživača vazduha i u svakom trenutku mora da bude dostupno. U skladu sa smernicom 93/42/EEZ obratite pažnju na sledeće tačke.

Opasnost od infekcije zbog klica u ustajaloj vodi!

Klice i bakterije se lako mogu nastaniti i razmnožavati u ustajaloj vodi.
⇒ Redovno čistite ovlaživač vazduha.
⇒ Ovlaživač vazduha koristite samo sa svežom vodom.

Opasnost od povređivanja zbog korišćenja aparata van propisanih uslova u okruženju

Korišćenje aparata van propisanih uslova u okruženju može da dovede do odstupanja tolerancije, do prekida rada aparata, kao i do povređivanja pacijenta.

⇒ Aparat koristite samo u okviru propisanih uslova u okruženju (pogledajte „10 Tehnički podaci“).

Materijalna šteta zbog prepunjenosti!

Voda koja curi može da uđe u aparat i da ga ošteti.
⇒ Ovlaživač vazduha pre punjenja skinite sa aparata.

⇒ Ovlaživač vazduha napunite samo do oznake „max“.

Materijalna šteta zbog vruće vode i aromatičnih dodataka!

Vruća voda ili aromatični dodaci (npr. ulje eukaliptusa) mogu da oštete kućište ovlaživača vazduha i grejni štap.

⇒ Nemojte sipati vruću vodu.

⇒ Nemojte koristiti aromatične dodatke.

3.1 Opšte napomene

- Upotreba sterilne ili prokuvane vode je tokom primene u domaćinstvu potrebna samo u posebnim medicinskim slučajevima. Nemojte da koristite destilovanu vodu, koja je predviđena za tehničku upotrebu, jer bi mogla biti mikrobiološki neispravna.
- Da biste izbegli infekciju, kontaminaciju bakterijama ili ograničenje funkcije, obratite pažnju na poglavlje „Higijensko održavanje“ (pogledajte „5 Higijensko održavanje“).
- Prilikom korišćenja proizvoda drugih proizvođača može da dođe do prekida u radu funkcija i ograničene mogućnosti upotrebe. Osim toga možda neće biti ispunjeni zahtevi ekološke kompatibilnosti. Imajte u vidu da se u tim slučajevima gubi svako pravo na garanciju i odgovornost ukoliko nisu korišćeni ni dodatna oprema preporučena u ovom uputstvu za upotrebu ni originalni rezervni delovi.

4 Opis proizvoda

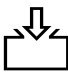

4.1 Pregled

Prikaz pojedinačnih delova možete da pronađete na naslovnoj strani.





Legenda

- Gornji deo ovlaživača
- Umetak ovlaživača
- Donji deo ovlaživača
- Ulazni otvor
- Izlazni otvor
- Grejni štap

4.2 Oznake i simboli

| Položaj | Simbol | Opis |
|---------|---|---|
| 4 |  | Sipajte vodu. |
| 6 |  | Ovlaživač vazduha se greje. Nemojte dodirivati grejni štap. |

4.3 Simboli na pločici aparata

| | |
|---|--|
|  | Aparat nemojte odlagati u otpad iz domaćinstva. |
| CE 0197 | CE oznaka (potvrđuje da je proizvod u skladu sa važećim evropskim smernicama). |
| 32 V DC | Jednosmerni napon od 32 V |
|  | Aplikator tip BF |
| IP22 | IP klasa zaštite: Stepen zaštite od čvrstih stranih tela. Aparat je zaštićen od prodiranja vodenih kapi. |
| >PC< | Oznaka materijala: Polikarbonat |
|  | Datum proizvodnje (mesec/godina) |
| Typ: WM100TH | Oznaka tipa: Aparat WM 100 TH |
|  | Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu. |
| SN | Serijski broj |

5 Higijensko održavanje

Ovlaživač vazduha treba čistiti jednom nedeljno, a ako se koristi u kliničkom okruženju treba ga dezinfikovati. Ako je potrebno, uklonite kamenac iz ovlaživača vazduha (pogledajte „5.1 Uklanjanje kamenca iz ovlaživača vazduha“). Ako su delovi kućišta u lošem stanju (postoje pukotine), treba ih zameniti. Ako je aparat za terapiju ili ovlaživač vazduha korišćen bez filtera za bakterije, u slučaju promene pacijenta potrebno je da specijalizovani prodavac izvrši profesionalno higijensko održavanje.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede jer je grejni štap vruć!

Tokom rada i kratko vreme nakon rada grejni štap je vruć i može da dođe do opekotina ako se dodirne. ⇒ Sačekajte da se grejni štap u potpunosti ohladi.

- Rastavite ovlaživač vazduha za disanje (sl. 4).
- Higijensko održavanje ovlaživača vazduha izvršite prema sledećoj tabeli. Sterilizacija nije dozvoljena.

| Deo | Čišćenje | Dezinfekcija |
|-----------------------|---|---|
| Donji deo ovlaživača | Toplom vodom i sredstvom za ispiranje. Preporuka: Jednom nedeljno očistite u gornjoj korpi mašine za pranje sudova (maks. 65 °C). Ukoliko je neophodno: | Izvršite dezinfekciju potapanjem (preporuka: gigasept FF®) / prokuvajte 5 minuta |
| Umetak ovlaživača | Uklonite kamenac (pogledajte 5.1) | Prokuvajte 5 minuta |
| Gornji deo ovlaživača | Obrišite vlažnom krpom: Koristite vodu ili blagi sapun; nemojte koristiti krpu od mikrovlakana | Izvršite dezinfekciju brisanjem (preporuka: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |
| Grejni štap | Ukoliko je neophodno: Uklonite kamenac (pogledajte 5.1) | Izvršite dezinfekciju potapanjem (preporuka: gigasept FF®) Dezinfekcija prskanjem (preporuka: perform advanced) ili prokuvajte 5 minuta |

- Delove isperite čistom vodom i osušite ih.
- Izvršite vizuelnu proveru.

- Ukoliko je neophodno: Zamenite oštećene delove.
- Sastavite ovlaživač vazduha (sl. 6).

5.1 Uklanjanje kamenca iz ovlaživača vazduha

- Ovlaživač vazduha skinite sa aparata za terapiju (sl. 4).
- Rastavite ovlaživač vazduha (sl. 4).
- U donji deo ovlaživača sipajte 300 ml običnog sirćeta (5%-ni rastvor bez aditiva).
- Umetak ovlaživača stavite u posudu sa običnim sirćetom (5%-ni rastvor bez aditiva). Umetak ovlaživača mora da bude sasvim prekriven sirćetom.
- Ostavite sirće da deluje 1 sat.
- Donji deo ovlaživača, grejni štap i umetak ovlaživača isperite čistom vodom.
- Pažljivo osušite donji deo ovlaživača, grejni štap i umetak ovlaživača.
- Sastavite ovlaživač vazduha (pogledajte sl. 5).

5.2 Zamena zaptivke grejnog štapa (sl. 6)

- Ukoliko je neophodno: Sačekajte da se grejni štap u potpunosti ohladi.
- Grejni štap izvadite odvrtanjem.
- Zamenite zaptivni prsten.
- Ponovo umetnite grejni štap.

6 Provera funkcije

Provera funkcije treba da se izvrši posle svakog higijenskog održavanja, posle svakog osposobljavanja za rad a najmanje na svakih 6 meseci.

- Proverite da li na delovima kućišta postoje pukotine i oštećenja. Ukoliko je neophodno: Zamenite oštećene delove.
- U ovlaživač vazduha sipajte vodu do oznake (pogledajte sl. 1A ili 1B).
- Proverite da li je ovlaživač vazduha zaptiven. Ukoliko je neophodno: Zamenite oštećene delove.
- U ovlaživač vazduha za disanje sipajte 200 ml vode.
- Ovlaživač vazduha priključite na aparat za terapiju i uključite ga.
- Snagu grejanja podesite na najviši stepen.

- Proverite da li se ovlaživač vazduha zagreva.
- Ako se ovlaživač vazduha posle 10 minuta samo malo zagrejava: Stupite u kontakt sa specijalizovanim prodavcem.

7 Smetnje

| Smetnja | Uzrok | Otklanjanje |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Ovlaživač vazduha se ne zagreva. | Stepen ovlaživača je isključen. | Podesite stepen ovlaživača. |
| | Ovlaživač vazduha je neispravan. | Popravite ovlaživač vazduha. |
| Ovlaživač vazduha nije zaptiven. | Zaptivka grejnog štapa je neispravna. | Zamenite zaptivku (pogledajte 5.2). |
| | Umetak ovlaživača nije pravilno umetnut. | Pravilno umetnite umetak ovlaživača. |
| | Umetak ovlaživača je neispravan. | Zamenite umetak ovlaživača. |
| Ovlaživač vazduha se isključuje. | Pukotine na donjem delu ovlaživača. | Zamenite donji deo ovlaživača. |
| | Ovlaživač vazduha je prazan. | Ovlaživač vazduha napunite vodom. |

8 Održavanje

Ako se koristi u skladu sa namenom (pogledajte „2.1 Svrha upotrebe“), neće biti potrebno održavanje ovlaživača vazduha.

9 Obim isporuke

prismaAQUA, crne boje – WM 29680
prismaAQUA, bele boje – WM 29490

9.1 Dodatna oprema i rezervni delovi

Po potrebi možete posebno da poručite delove dodatne opreme i rezervne delove. Aktuelnu listu možete da pronađete na internetu ili kod ovlašćenog specijalizovanog prodavca.

10 Tehnički podaci

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Klasa proizvoda prema 93/42/EEZ | Ila |
| Dimenzije Š x V x D u cm | 14 x 13,5 x 18 |
| Težina (bez vode) | 0,6 kg |

9 Skop penghantaran

prismaAQUA, hitam - WM 29680

prismaAQUA, putih - WM 29490

9.1 Aksesori dan alat ganti

Anda boleh menempah aksesori dan alat ganti secara berasingan, sekiranya perlu. Anda boleh mendapatkan senarai semasa dalam talian atau daripada pengedar pakar anda yang sah.

10 Data teknikal

| | |
|---|---|
| Kelas produk mengikut 93/42/EWG | Ila |
| Dimensi L x T x D dalam cm | 14 x 13.5 x 18 |
| Berat (tanpa air) | 0.6 kg |
| Julat suhu Operasi Penyimpanan | +5 °C hingga +37 °C -25 °C hingga +70 °C |
| Kelembapan operasi dan penyimpanan yang dibenarkan | 15 % hingga 93 %, tidak meluwap |
| Julat tekanan udara | 600 hPa-1100 hPa, bersamaan dengan ketinggian pada 4000 m dari paras laut |
| Kuasa elektrik | Maks. 30 VA (hanya dengan gabungan peranti yang diluluskan) |
| Klasifikasi mengikut EN 60601-1-11: Jenis perlindungan terhadap kejutan elektrik Gred perlindungan terhadap kejutan elektrik Perlindungan terhadap kemasukan air dan pepejal yang berbahaya | Kelas perlindungan II Jenis BF IP22 |
| Klasifikasi mengikut DIN EN 60601-1: Jenis operasi | Operasi berterusan |
| Keserasian elektromagnet (EMC) mengikut DIN EN 60601-1-2 Gangguan radio Kekebalan gangguan radio (Parameter ujian dan nilai had boleh didapati daripada pengeluar, sekiranya perlu) | PEN 55011 B IEC 61000-4 bahagian 2 hingga 6, bahagian 11, bahagian 8 IEC 61000-3 bahagian 2 dan 3 |
| Pemanasan udara pernafasan | Maks. +3 °C |

| | |
|--|---|
| Penghantaran sistem pelembap udara pernafasan mengikut ISO 8185 pada tahap pelembap 7 tanpa hos yang dipanaskan pada 23 °C - 5 hPa (12.2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25.9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| Penghantaran sistem pelembap udara pernafasan mengikut ISO 8185 pada tahap pelembap 7 dengan hos yang dipanaskan pada 23 °C - 5 hPa (12.2 l/min) - 10 hPa (18 l/min) - 20 hPa (25.9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| Jumlah pengisian maksimum | 400 ml |
| Susutan tekanan | Susutan tekanan merentas gabungan peranti bagi peranti terapi WM 100 TD dan pelembap udara pernafasan WM 100 TH tidak meningkat. |
| Aliran maksimum | 248 l/min |
| Tejanan operasi maksimum yang dibenarkan | 50 hPa |
| Kebocoran gas pada tekanan operasi maksimum | 0.0 l/min |
| WM 100 TH boleh digabungkan dengan | WM 090 TD WM 100 TD WM 110 TD WM 120 TD |

Tertakluk pada perubahan pembinaan

11 Jaminan

Maklumat tentang syarat jaminan boleh ditemukan dalam arahan penggunaan peranti terapi anda.

12 Pengakuan keakuran

Maklumat tentang pengakuan keakuran boleh ditemukan dalam arahan penggunaan peranti terapi anda.

1 Operasi/Petunjuk

Sila lihat rajah untuk mengetahui cara mengisi, menyambung dan mengeluarkan pelembap udara pernafasan:

- 1A Isi pelembap udara pernafasan
- 1B Isi pelembap udara pernafasan (alternatif kepada 1)
- 2 Sambungkan pelembap udara pernafasan
- 3 Keluarkan pelembap udara pernafasan.
- 4 Buka pelembap udara pernafasan.
- 5 Pasang pelembap udara pernafasan.
- 6 Gantikan pengedap elemen pemanas.

Letakkan pelembap udara pernafasan pada peranti terapi: Operasi berbeza-beza, bergantung pada peranti terapi yang digunakan. Patuhi arahan penggunaan peranti terapi anda.

2 Pengenalan

2.1 Tujuan penggunaan

Pelembap udara pernafasan WM 100 TH memanaskan dan melembapkan udara pernafasan dan menghalang membran mukus di dalam saluran pernafasan daripada menjadi kering. Peranti ini boleh digunakan dalam kemudahan klinikal dan di rumah.

2.2 Penerangan fungsi

Pelembap udara pernafasan yang dipanaskan berfungsi mengikut prinsip pelepasan. Udara yang dibekalkan disalurkan ke atas permukaan air suam. Ini akan meningkatkan kelembapan relatif dan suhu aliran udara. Output pemanasan boleh dilaraskan secara berperingkat pada peranti terapi.

2.3 Indikasi

Saluran pernafasan atas kering dan udara pernafasan terasa terlalu sejuk. prismaAQUA hanya boleh digunakan seperti yang disyorkan oleh doktor.

2.4 Kontraindikasi

Pelembap udara pernafasan tidak boleh digunakan pada pesakit yang saluran pernafasan atasnya dipintas.

2.5 Kesan sampingan

Tiada kesan sampingan yang diketahui.

3 Keselamatan

Baca arahan penggunaan ini dengan cermat. Ini ialah sebahagian daripada pelembap udara pernafasan dan mesti tersedia pada bila-bila masa. Menurut Garis Panduan 93/42/EEC, sila ambil perhatian terhadap perkara berikut.

Risiko jangkitan kuman dalam air bertakung!

Kuman dan bakteria boleh mendap dan membiak dalam air bertakung dengan mudah.
⇒ Sentiasa bersihkan pelembap udara pernafasan.
⇒ Hanya gunakan pelembap udara pernafasan dengan air tawar.

Risiko kecederaan disebabkan peranti dikendalikan di luar keadaan persekitaran yang ditentukan

Penggunaan peranti ini di luar keadaan persekitaran yang ditentukan boleh menyebabkan ketakpatuhan dengan toleransi dan kerosakan peranti dan mencederakan pesakit.

⇒ Kendalikan peranti hanya dalam keadaan persekitaran yang ditentukan (lihat "10 Data teknikal").

Kerosakan harta benda akibat terlebih isi!

Air yang bocor boleh memasuki peranti dan merosakkan peranti tersebut.

⇒ Keluarkan pelembap udara pernafasan dari peranti sebelum diisi.

⇒ Hanya isi pelembap udara pernafasan hingga tanda maksimum.

Kerosakan harta benda yang disebabkan oleh air panas dan bahan tambahan aromatik!

Air panas atau bahan tambahan aromatik (cth. minyak kayu putih) boleh merosakkan perumah pelembap udara pernafasan dan elemen pemanas.

⇒ Jangan isi air panas.

⇒ Jangan gunakan bahan tambahan aromatik.

3.1 Petua umum

- Penggunaan air steril atau air masak di rumah hanya perlu dalam kes perubatan yang luar biasa. Jangan gunakan air suling untuk tujuan teknikal kerana air ini mungkin tercemar secara mikrobiologi.
- Untuk mencegah jangkitan, pencemaran bakteria atau kemerosotan fungsi, ambil perhatian terhadap bab penyediaan kebersihan (lihat "5 Penyediaan kebersihan").

- Penggunaan barang asing boleh menyebabkan kegagalan fungsi dan mengahadkan kebolegunaan. Tambahan pula, keperluan keserasian bio tidak dapat dipatuhi. Beri perhatian bahawa dalam kes seperti ini, setiap hak ke atas jaminan dan liabiliti tidak terpakai, jika aksesori atau alat ganti tulen yang disyorkan dalam arahan penggunaan tidak digunakan.

4 Penerangan produk



4.1 Gambaran keseluruhan

Gambar rajah setiap bahagian individu terdapat pada muka depan.



Petunjuk



- Bahagian atas pelembap
- Sisipan pelembap
- Bahagian bawah pelembap
- Bukaan pintu masuk
- Bukaan pintu keluar
- Elemen pemanas

4.2 Label dan simbol

| Kedudukan | Simbol | Penerangan |
|-----------|---|---|
| 4 |  | Isi air. |
| 6 |  | Pelembap udara pernafasan dipanaskan. Jangan sentuh elemen pemanas. |

4.3 Simbol pada plat peranti

| | |
|---|--|
|  | Jangan lupuskan peranti bersama-sama buangan isi rumah. |
| CE 0197 | Label CE (mengesahkan yang produk mematuhi garis panduan Eropah yang berkenaan). |
| 32 V DC | 32 V arus terus |
|  | Bahagian penggunaan jenis BF |
| IP22 | Kelas perlindungan IP: Gred perlindungan ke atas bendasing pepejal. Peranti tahan titisan air. |
| >PC< | Penetapan bahan: Polikarbonat |

| | |
|---|--|
|  | Tarikh pengeluaran (bulan/tahun) |
| Typ: WM100TH | Penetapan jenis: Peranti WM 100 TH |
|  | Beri perhatian kepada arahan penggunaan. |
| SN | Nombor siri |

5 Penyediaan kebersihan

Bersihkan pelembap udara pernafasan setiap minggu atau disinfeksi di kawasan hospital. Jika perlu, nyahkapurkan pelembap udara pernafasan ([lihat "5.1 Nyahkapurkan pelembap udara pernafasan"](#)). Gantikan bahagian perumah sekiranya berada dalam keadaan yang tidak baik (retak). Sekiranya peranti terapi atau pelembap udara pernafasan telah digunakan tanpa penapis bakteria, penyediaan kebersihan profesional mesti dilakukan oleh pengedar pakar semasa menukar pesakit.

⚠ AMARAN

Risiko kecederaan akibat elemen pemanas yang panas!

Semasa dan sejurus selepas operasi, elemen pemanas menjadi panas dan menyentuh elemen pemanas ini boleh menyebabkan melecur.

⇒ Biarkan elemen pemanas menyejuk sepenuhnya.

- Buka pelembap udara pernafasan (Rajah [4](#)).
- Lakukan penyediaan pembersihan pelembap udara pernafasan mengikut jadual berikut. Pensterilan tidak dibenarkan.

| Bahagian | Pembersihan | Disinfeksi |
|-------------------------|---|---|
| Bahagian bawah pelembap | Dengan air suam dan bahan bilas. Cadangan: Bersihkan setiap minggu di dalam bakul atas mesin basuh pinggan mangkuk (maks. 65 °C). | Disinfeksi dengan merendam (Cadangan: gigasept FF®)/ rebus selama 5 minit |
| Sisipan pelembap | Sekiranya perlu: Nyahkapurkan (lihat 5.1) | rebus selama 5 minit |
| Bahagian atas pelembap | Lap lembapan: Gunakan air atau sabun lembut; jangan gunakan tuala mikrofiber | Disinfeksi dengan lap (Cadangan: terralin® protect / perform advanced Alcohol EP) |

| Bahagian | Pembersihan | Disinfeksi |
|----------------|---|---|
| Elemen pemanas | Sekiranya perlu: Nyahkapurkan (lihat 5.1) | Disinfeksi dengan merendam (Cadangan: gigasept FF®) Disinfeksi dengan semburan (Cadangan: perform advanced) atau rebus selama 5 minit |

- Bilas bahagian dengan air bersih dan keringkan.
- Lakukan pemeriksaan visual.
- Sekiranya perlu: Gantikan bahagian yang rosak.
- Pasang pelembap udara pernafasan (Rajah [6](#)).

5.1 Nyahkapurkan pelembap udara pernafasan

- Keluarkan pelembap udara pernafasan daripada peranti terapi (Rajah [4](#)).
- Buka pelembap udara pernafasan (Rajah [4](#)).
- Isi 300 ml cuka isi rumah tulen (larutan 5% tanpa bahan tambahan) ke dalam bahagian bawah pelembap.
- Letakkan sisipan pelembap ke dalam mangkuk dengan cuka isi rumah tulen (larutan 5% tanpa bahan tambahan). Sisipan pelembap mestilah diliputi dengan cuka sepenuhnya.
- Biarkan cuka berfungsi selama 1 jam.
- Bilas bahagian bawah pelembap, elemen pemanas dan sisipan pelembap dengan air bersih.
- Keringkan bahagian bawah pelembap, elemen pemanas dan sisipan pelembap dengan berhati-hati.
- Pasang pelembap udara pernafasan ([lihat Rajah 5](#)).

5.2 Gantikan pengedap elemen pemanas (Rajah [6](#))

- Sekiranya perlu: Biarkan elemen pemanas menyejuk sepenuhnya.
- Tanggalkan elemen pemanas.
- Gantikan gelang sendal.
- Masukkan semula elemen pemanas.

6 Pemeriksaan fungsi

Lakukan pemeriksaan fungsi selepas setiap penyediaan kebersihan, pembaikan, ataupun sekurang-kurangnya setiap 6 bulan.

- Periksa keretakan dan kerosakan pada bahagian perumah. Sekiranya perlu: Gantikan bahagian yang rosak.
- Isi pelembap udara pernafasan dengan air hingga tanda ([lihat Rajah 1A](#) atau [1B](#))
- Periksa sama ada pelembap udara pernafasan kedap. Sekiranya perlu: Gantikan bahagian yang rosak.
- Isi pelembap udara pernafasan dengan 200 ml air.
- Sambungkan pelembap udara pernafasan ke peranti terapi dan hidupkan.
- Tetapkan output pemanasan kepada tahap yang tertinggi.
- Periksa sama ada pelembap udara pernafasan panas.
- Jika pelembap udara pernafasan tidak panas sedikit selepas 10 minit: Hubungi pengedar pakar.

7 Gangguan

| Gangguan | Penyebab | Pemulihan |
|--|---|--|
| Pelembap udara pernafasan tidak panas. | Tahap pelembap dimatikan. | Tetapkan tahap pelembap. |
| | Pelembap udara pernafasan rosak. | Minta pembaikan pelembap udara pernafasan. |
| Pelembap udara pernafasan tidak kedap. | Pengedap elemen pemanas rosak. | Gantikan pengedap (lihat 5.2). |
| | Sisipan pelembap tidak dimasukkan dengan betul. | Masukkan sisipan pelembap dengan betul. |
| | Sisipan pelembap rosak. | Gantikan sisipan pelembap. |
| Pelembap udara pernafasan dimatikan. | Bahagian bawah pelembap retak. | Gantikan bahagian bawah pelembap. |
| | Pelembap udara pernafasan kosong. | Isi pelembap udara pernafasan dengan air. |

8 Penyelenggaraan

Apabila digunakan seperti yang disyorkan ([lihat "2.1 Tujuan penggunaan"](#)), pelembap udara pernafasan tidak perlu diselenggara.

| | |
|--|--|
| EN 60601-1-11 에 따른 구분 : 감전 방지 유형 감전에 대한 보호 등급 물 및 고체의 유해한 유입에 대한 방지 | 보호 등급 II 형식 BF IP22 |
| DIN EN 60601-1 에 따른 분류 : 작동 모드 | 지속모드 |
| 전자기 적합성 (EMC) 기준 DIN EN 60601-1-2 무선 간섭 무선 간섭 저항 (테스트 파라미터와 한계값은 필요할 경우 제조사에 요청할 수 있습니다) | PEN 55011 B IEC 61000-4 파트 2 ~ 6, 파트 11, 파트 8 IEC 61000-3 파트 2 ~ 3 |
| 호흡 공기의 가열 | 최대 +3 °C |
| ISO 8185 에 따른 호흡 공기 가습기 시스템 제원, 가습기 단계 7 의 경우, 열선이 있는 호스 미 장착, 23 °C 의 경우 - 5 hPa(12.2 l/min) - 10 hPa(18 l/min) - 20 hPa(25.9 l/min) | 22 mg/l 23 mg/l 20 mg/l |
| ISO 8185 에 따른 호흡 공기 가습기 시스템 제원, 가습기 단계 7 의 경우, 열선이 있는 호스 장착, 23 °C 의 경우 - 5 hPa(12.2 l/min) - 10 hPa(18 l/min) - 20 hPa(25.9 l/min) | 27 mg/l 28 mg/l 21 mg/l |
| 최대 주입 용량 | 400 ml |
| 압력 하강 | 치료 장비 WM100TD 및 호흡 공기 가습기 prismaAQUA 장비 조합을 통한 압력 하강이 높아지지 않습니다. |
| 최대 플로우 | 248 l/min |
| 최대 허용 작동 압력 | 50 hPa |
| 최대 작동 압력에서의 가스 누출 | 0.0 l/min |
| prismaAQUA 다음과 조합 가능 | WM090TD WM100TD WM110TD WM120TD |

설계 변경권 보유

11 보증

보증 조건 관련 정보는 치료 장비 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.

12 적합성 확인서

적합성 확인서 관련 정보는 치료 장비 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.

부작용 신고 연락처 : 한국 의료기기 안전 정보원 (080-080-4183)

1 조작 / 범례

호흡 공기 가습기 주입, 연결 및 분리 방법은 이미지에서 확인하십시오.

1A 호흡 공기 가습기 주입

1B 호흡 공기 가습기 주입 (**1A** 관련 대안)

2 호흡 공기 가습기 연결

3 호흡 공기 가습기를 분리하십시오.

4 호흡 공기 가습기를 분해하십시오.

5 호흡 공기 가습기를 조립하십시오.

6 히팅 로드 실링을 교체하십시오.

호흡 공기 가습기를 치료 장비에서 설정 : 사용하는 치료 장비에 따라 조작 방법이 다릅니다. 치료 장비의 사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

2 머리말

2.1 사용 목적

호흡 공기 가습기 WM 100 TH 가 호흡 공기를 따뜻하게 하고 축축하게 하여 호흡기 점막이 건조되는 것을 방지합니다. 이 장치는 의료 설비와 가정 영역에서 사용할 수 있습니다.

2.2 기능 설명

열선이 있는 호흡 공기 가습기는 패스오버 (Pass-Over) 원리에 의해 작동합니다. 흡입된 공기는 온수 표면을 거쳐 흐릅니다. 이를 통해 흐르는 공기의 상대 습도와 온도가 높아지게 됩니다. 히팅 출력은 치료 장비에서 단계별로 조정됩니다.

2.3 용도 표시

건조한 상부 호흡구와 너무 차게 느껴지는 호흡 공기. prismaAQUA 는 의사의 권고에 따라 사용해야 합니다.

2.4 사용 금지

호흡 공기 가습기는 상부 호흡구에 바이패스 장치가 설치된 환자에게는 사용할 수 없습니다.

2.5 부작용

알려진 부작용은 없습니다.

3 안전

이 사용 설명서를 주의 깊게 숙독하십시오. 이 호흡 공기 가습기의 구성요소로서 언제나 참조할 수 있어야 합니다. 가이드라인 93/42/EEC 에 따라 다음 항목에 유의하십시오.

고인 물에 발생한 세균으로 인한 감염 위험!
고인 물에는 세균과 박테리아가 쉽게 발생하고 번식할 수 있습니다.

⇒ 호흡 공기 가습기를 정기적으로 세척하십시오.
⇒ 호흡 공기 가습기는 신선한 물과 함께만 사용하여 합니다.

규정된 환경 조건 외에서 기기를 조작하는 경우 부상 위험

규정된 환경 조건 외에서 기기를 사용하면 허용오차를 준수할 수 없고 오작동이 발생하며, 환자에게 부상을 입힐 수 있습니다.

⇒ 지정된 주변 조건 내에서만 기기로 조작하십시오 ("10 기술 제원" 참조).

과주입에 따른 대물 손상!

흘러나오는 물이 장비 안으로 들어가 손상이 발생할 수 있습니다.

⇒ 호흡 공기 가습기는 장비에 주입하기 전에 분리하십시오.

⇒ 호흡 공기 가습기는 max 표시까지만 주입하십시오.

뜨거운 물과 향 첨가물로 인한 대물 손상!

뜨거운 물 또는 향 첨가물 (예 : 유칼립투스 오일) 이 호흡 공기 가습기와 히팅 로드의 캐비닛을 손상시킬 수 있습니다.

⇒ 뜨거운 물을 주입하지 마십시오.

⇒ 향 첨가물을 사용하지 마십시오.

3.1 일반 정보

- 정화 처리 또는 끓인 물은 가정 또는 예외적인 의료 케이스에서만 사용하십시오. 기술 용도로 사용할 수 있는 증류수는 사용하지 마십시오. 미생물이 발생할 수 있습니다.
- 감염, 박테리아로 인한 오염 또는 기능 저하를 방지하려면 위생 처리 준비 단원 ("[5 위생 처리](#)" 참조) 의 내용을 참조하십시오.
- 타사 장비 사용 시 기능 고장이 발생하거나 사용성이 제한될 수 있습니다. 또한, 생체 적합성에 관한 요건이 충족되지 않을 수 있습니다. 사용 설명서에 권장된 부속장비 또는 정품 교체 부품을 사용하지 않았다면 보증 및 책임 청구 효력이 상실된다는 점에 유의하십시오.

4 제품 설명

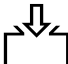

4.1 개요

개별 부품의 설명은 표지에서 찾을 수 있습니다.





범례

- 가습기 상부
- 가습기 인서트
- 가습기 하부
- 흡입 구멍
- 배출 구멍
- 히팅 로드

4.2 표시 및 기호

| 직급 | 기호 | 설명 |
|----|---|------------------------------------|
| 4 |  | 물을 주입하십시오. |
| 6 |  | 호흡 공기 가습기가 가열됩니다. 히팅 로드를 만지지 마십시오. |

4.3 장비 명판 식별 기호

| | |
|--|---|
|  | 기기를 일반 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 됨. |
| CE 0197 | CE 표시 (본 제품이 관련 유럽 지침을 준수한다는 점을 확인). |
| 32 V DC | 32 V 직류 전압 |
|  | 사용 부품 형식 BF |
| IP22 | IP 보호 등급: 고체 이물질에 대한 보호 등급. 기기는 물방울로부터 보호됩니다. |
| >PC< | 소재 표시: 폴리카보네이트 |
|  | 제조일 (월 / 연도) |
| TYP: WM100TH | 타입 명칭: WM100TH 의 장비 |
|  | 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 준수하십시오. |
| SN | 제품 번호 |

5 위생 처리

호흡 공기 가습기는 매주 세척하고 의료 영역의 경우 소독하십시오. 필요할 경우 호흡 공기 가습기에서 석회를 제거하십시오 (**"5.1 호흡 공기 가습기의 석회 제거"** 참조). 상태가 좋지 않을 경우 (균열 발생) 하우징 부품을 교체하십시오. 치료 장비 또는 호흡 공기 가습기를 박테리아 필터 없이 사용할 경우, 환자를 교체할 때 전문 취급점의 전문적인 위생 조치를 실행해야 합니다.

⚠ 경고

뜨거운 히팅 로드로 인한 부상 위험!

작동 중 및 작동 직후 히팅 로드가 뜨거워서 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
⇒ 히팅 로드를 완전히 식히십시오.

- 호흡 공기 가습기를 분해하십시오 (그림 4).
- 호흡 공기 가습기를 다음의 표에 따라 위생처리합니다. 살균 처리는 허용되지 않습니다.

| 부품 | 세척 | 소독 |
|---------|--|---|
| 가습기 하부 | 따뜻한 물과 세제제를 사용합니다. 권장: 매주 식기 세척기의 상부 바구니 (최대 65 °C) 에서 세척하십시오. | 침적 소독 (권장 제품: gigasept FF®) / 5 분 동안 끓이기 |
| 가습기 인서트 | 필요한 경우: 석회 제거 (5.1 참조) | 5 분간 끓이기 |
| 가습기 상부 | 물기를 닦아냄: 물 또는 연성 비누를 사용합니다. 극세사 천을 사용하지 마십시오. | 티슈를 사용한 소독 (권장 제품: terralin® protect/perform advanced Alcohol EP) |
| 히팅 로드 | 필요한 경우: 석회 제거 (5.1 참조) | 침적 소독 (권장 제품: gigasept FF®) 스프레이 소독 (권장 제품: perform advanced) 또는 5 분 동안 끓이기 |

- 부품을 깨끗한 물로 다시 행군 후 건조하십시오.
- 육안 검사를 실시하십시오.
- 필요한 경우: 손상된 부품을 교체하십시오.
- 호흡 공기 가습기를 조립하십시오 (그림 6).

5.1 호흡 공기 가습기의 석회 제거

- 치료 장비에서 호흡 공기 가습기를 분리하십시오 (그림 4).
- 호흡 공기 가습기 분해하십시오 (그림 4).
- 300 ml 의 깨끗한 가정용 식초 (5 % 솔루션, 추가 성분 없음) 를 가습기 하부에 주입하십시오.
- 가습기 인서트를 깨끗한 가정용 식초 (5 % 솔루션, 추가 성분 없음) 가 담긴 그릇에 담그십시오. 가습기 인서트가 식초에 완전히 잠겨야 합니다.
- 식초가 1 시간 동안 작용하도록 하십시오.
- 가습기 하부, 히팅 로드 및 가습기 인서트를 깨끗한 물로 씻어내십시오.
- 가습기 하부, 히팅 로드 및 가습기 인서트를 주의하여 말리십시오.

- 호흡 공기 가습기를 조립하십시오 (그림 5 참조).

5.2 히팅 로드 실링 교체 (6 그림)

- 필요한 경우: 히팅 로드를 완전히 식히십시오.
- 히팅 로드를 풀어 빼십시오.
- 실링 링을 교체하십시오.
- 히팅 로드를 다시 끼우십시오.

6 기능 점검

위생 처리나 수리 후 매번, 그리고 최소 6 개월마다 다음과 같이 기능 점검을 실시하십시오.

- 하우징 부품에서 균열 및 손상 여부를 점검하십시오. 필요한 경우: 손상된 부품을 교체하십시오.
- 호흡 공기 가습기에 표시까지 물 주입 (그림 1A 또는 1B 참조)
- 호흡 공기 가습기가 실링된 상태인지 확인하십시오. 필요한 경우: 손상된 부품을 교체하십시오.
- 호흡 공기 가습기에 200 ml 의 물을 주입하십시오.
- 호흡 공기 가습기를 치료 장비에 연결하고 스위치를 켭니다.
- 히팅 출력을 최고 단계로 조정하십시오.
- 호흡 공기 가습기가 따뜻해지고 있는지 점검하십시오.
- 호흡 공기 가습기가 10 분 후에도 따뜻해지지 않을 경우: 전문 취급점에 연락하십시오.

7 문제

| 장애 | 원인 | 제거 |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| 호흡 공기 가습기가 따뜻해지지 않습니다. | 가습기 단계가 꺼졌습니다. | 가습기 단계를 조정하십시오. |
| 호흡 공기 가습기가 따뜻해지지 않습니다. | 호흡 공기 가습기에 결함이 있습니다. | 호흡 공기 가습기를 정비하십시오. |

| 장애 | 원인 | 제거 |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 호흡 공기 가습기에 누출이 있습니다. | 히팅 로드 실링에 결함이 있습니다. | 실링을 교체하십시오 (5.2 참조). |
| | 가습기 인서트가 올바르게 삽입되어 있지 않습니다. | 가습기 인서트를 올바르게 삽입하십시오. |
| | 가습기 인서트에 결함이 있습니다. | 가습기 인서트를 교체하십시오. |
| 호흡 공기 가습기가 꺼집니다. | 가습기 하부에 균열이 있습니다. | 가습기 하부를 교체하십시오. |
| | 호흡 공기 가습기가 비어 있습니다. | 호흡 공기 가습기에 물을 주입하십시오. |

8 정비

규정에 적합하게 사용할 경우 (**"2.1 사용 목적"** 참조) 호흡 공기 가습기는 정비할 필요가 없습니다.

9 공급 범위

prismaAQUA, 블랙 - WM 29680

prismaAQUA, 화이트 - WM 29490

9.1 부속장비 및 예비부품

필요한 경우 부속장비 및 예비부품을 별도로 주문할 수 있습니다. 현재 목록은 인터넷 또는 공식 전문 취급점에서 구입할 수 있습니다.

10 기술 제원

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 93/42/EEC 에 따른 제품 등급 | Ila |
| 규격 W x H x D (단위 cm) | 14 x 13.5 x 18 |
| 중량 (물 제외) | 0.6kg |
| 온도 범위 작동 | +5 °C ~ +37 °C |
| 보관 | -25 °C ~ +70 °C |
| 허용 작동 및 보관 습도 | 15 % ~ 93 %, 비응축 |
| 기압 범위 | 600 hPa ~ 1100 hPa, 고도 해발 4000 m |
| 전력 | 최대 30 VA (허용된 장비와 함께 사용할 경우에만) |