

Kleine Maske – große Wirkung



Als Marktführer im Bereich Maskentechnologie hat ResMed sich mit Gesundheitsexperten aus dem pädiatrischen Bereich zusammengetan, um für Sie Pixi™ zu entwickeln – eine Kindermaske, entwickelt mit Blick auf Kinder und ihre Familien.

Eine **speziell für Kinder** entwickelte Maske

Der Entwicklung der Pixi-Kindermaske wurden anthropometrische Daten von Kindern im Alter von zwei Jahren und älter zugrunde gelegt. Durch diese einzigartige Methode ist Pixi viel mehr als nur eine verkleinerte Erwachsenenmaske. Unter Berücksichtigung von Knochenstruktur, Gesichtszügen und Sensibilität der Haut von Kindern, konnte eine Maske entwickelt werden, die den Druck auf die empfindlichen Gesichter minimiert.

In Kombination mit den neuesten ResMed Beatmungsgeräten Stellar™ 100 und Stellar™ 150, einem VPAP™ S oder VPAP™ ST Atemtherapiegerät haben Sie nun die ideale Lösung für die Atemtherapie von Kindern. Pixi bietet höchsten Komfort und Zuverlässigkeit für Kinder von zwei Jahren und älter und einem Gewicht von mehr als 13kg.

Die Pixi-Kindermaske wurde unter Beachtung beider Seiten entwickelt: sowohl der des Kindes als auch der seiner Betreuenden und Behandelnden.

Jede Funktion ist sorgfältig durchdacht, um Therapiekomfort und Behandlungskzeptanz für alle Beteiligten zu erreichen und zu sichern. So können sich Betreuende und Behandelnde uneingeschränkt auf die Unterstützung und die Betreuung des Kindes konzentrieren.



Pixi™
KINDERMASKE



Technologische Höhepunkte

NEU Speziell für Kinder entwickeltes Kopfband*

Drei Einstellbereiche – die Maske kann oben, an der Seite und unten durch Bänder reguliert werden. Durch diesen erweiterten Anpassungsbereich ist es möglich, Kinder unterschiedlichen Alters zu versorgen.

Außerhalb des Gesichtsfeldes – das Kopfband ist so entworfen, dass es abseits der Augen und Ohren des Kindes verläuft, um Reizungen und Einschränkungen zu verringern.

Sichtkontakt – nicht nur das Kind wird in seinem Sehen nicht beeinträchtigt, während es die Maske trägt, auch für die Betreuenden und Behandelnden ist es von Vorteil, dass Sie die Augen und große Teile des kindlichen Gesichtes beobachten können.

* Entwickelt unter Berücksichtigung spezifischer anthropometrischer Daten von Kindern bezüglich Kopf und Gesicht.

Angenehmes Breathe-o-Prene® Kopfbandmaterial

Dezent eingefärbtes Material für eine beruhigende und unaufdringliche Erscheinung im Kindergesicht

Weiches, komfortables Maskenkissen

Einwandiges, dünnes Silikonmaskenkissen reduziert den Druck auf das empfindliche Kindergesicht, ohne Abstriche bei der Dichtigkeit

Zwei Atemschlauchpositionen

Abhängig von der Schlafposition Ihres Kindes kann der Atemschlauch zu beiden Seiten des Maskenkissens angebracht werden

Spring-flex Atemschlauch

Leicht biegsam und dehnbar, bleibt nicht hängen und übt auch dann keinen Zug aus, wenn Ihr Kind sich im Schlaf dreht



Seitliche Haltebandfixierung

So positioniert, um im Blickfeld des Erwachsenen zu sein

Flexible Stabilisatoren

Ermöglichen es, die Maske der jeweiligen Gesichtsstruktur und -form des Kindes entsprechend anzupassen

Schnellverschluss

Erleichtert die Abnahme der Maske, wenn die Einstellungen der Kopfbänder beibehalten werden sollen

Sicherheitsverschluss

Im Notfall kann der Verschluss durch kräftiges Ziehen am unteren Kopfband sogar noch schneller gelöst werden

Kombinieren Sie die Pixi-Maske mit den neuesten Stellar oder VPAP-Geräten – zu einem Therapiesystem, das mehr Komfort, Zuverlässigkeit und wirksame Behandlung bietet.



Stellar 100/Stellar 150




VPAP S/VPAP ST

+



Pixi Kindermaske

Überreicht durch:

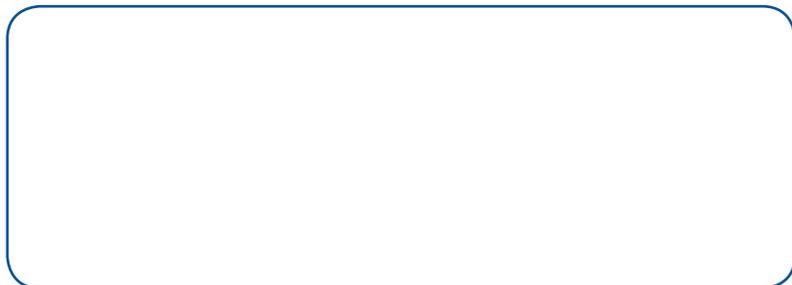

Artikelnummer

Pixi **61031**

Hilfsmittelnr. 14.24.16.2040