

Produktpalette EcoStar™ :

eine neue preisgünstige und leistungsstarke Produktpalette von Geräten zur Behandlung des obstruktiven Schlafapnoesyndroms (OSAS) und des obstruktiven Schlafapnoe-Hypopnoesyndroms (OSAHS).



EcoStar™



EcoStar™ Info



EcoStar™ Auto



GoodKnight® H2O


	Betriebsarten/ Algorithmen	Einstellungen	Eigenschaften	Datenverwaltung
CPAP-Gerät mit konstantem Druck	CPAP	Druckbereich: 4-20 cm H ₂ O	Daten: Druck und Verwendung Befeuchter: kompatibler GoodKnight H ₂ O Rampe: Zeit (T) Patientenschlauchsystem: ø 22 mm, ø 15 mm Höheneinstellung: Automatisch	
	CPAP <i>Autokalibration</i> <i>Komfort-Kalibration (CC+)</i> <i>Auto ON</i>	Druckbereich: 4-20 cm H ₂ O Rampenzeit: 0-45 min CC+ : OFF (AUS), während der Rampenzeit	Daten: Respiratorische Ereignisse (Apnoe, zentrale Apnoe, Hypopnoe, zentrale Hypopnoe, verringerter Atemfluss, Schnarchen), Atemfluss des Patienten, Zusammenfassung und Tendenzen Datenabruf: USB-Kabel Mögliche Modem-Verbindung zur Fernüberwachung (Home Monitoring) Befeuchter: kompatibler GoodKnight H ₂ O Rampe: Zeit (T) Komfortmodus: Komfort-Kalibration <i>plus (CC+)</i> Patientenschlauchsystem: ø 22 mm, ø 15mm, spezifische Kalibration Höheneinstellung: Automatisch	Analyseperiode: letztes Jahr, letzter Monat, manuelle Auswahl der Periode Datentyp: Nachtkalender, mittlerer Druck, Compliance-Informationen, respiratorische Ereignisse, IAH Grafiken: Ereignisse geg. Druck, Undichtigkeiten, gemessener Druck, Druck geg. % Zeit, Atemfluss des Patienten Tendenzen: Ereignisse, Zustand der oberen Atemwege, Anzeige der Verlaufsdaten der Einstellungen Option Modem
Auto-CPAP	CPAP/ Auto CPAP <i>Autokalibration</i> <i>Komfort-Kalibration (CC+)</i> <i>Algorithmus Auto-CPAP</i> <i>Auto ON</i>	Druckbereich: 4-20 cm H ₂ O Rampenzeit: 0-45 min Druckeinstellung: Pmin, Pmax CC+ : OFF (AUS), während der Rampenzeit	Daten: Respiratorische Ereignisse (Apnoe, zentrale Apnoe, Hypopnoe, zentrale Hypopnoe, verringerter Atemfluss, Schnarchen), Atemfluss des Patienten, Zusammenfassung und Tendenzen Datenabruf: USB-Kabel Mögliche Modem-Verbindung zur Fernüberwachung (Home Monitoring) Befeuchter: kompatibler GoodKnight H ₂ O Rampe: Zeit (T) Komfortmodus: Komfort-Kalibration <i>plus (CC+)</i> Patientenschlauchsystem: ø 22 mm, ø 15mm, spezifische Kalibration Höheneinstellung: Automatisch	Analyseperiode: letztes Jahr, letzter Monat, manuelle Auswahl der Periode Datentyp: Nachtkalender, Druck, mittlere Druck, Compliance-Informationen, respiratorische Ereignisse, IAH, wirksamer Druck mehr als 90 % der Zeit Grafiken: Ereignisse geg. Druck, Undichtigkeiten, gemessener Druck, Druck geg. % Zeit, Atemfluss des Patienten Tendenzen: Ereignisse, Zustand der oberen Atemwege, Anzeige der Verlaufsdaten der Einstellungen Option Modem

Beheizter Befeuchter	Beheizter Befeuchter <i>Humid control</i>	<p>Die Funktion „Humid Control“</p> <p>Stellt einen konstanten Temperaturunterschied zwischen dem Wasser und der Umgebungsluft sicher, um die Kondensation im Schlauchsystem auf ein Minimum zu reduzieren und das Befeuchtungsniveau stabil zu halten.</p> <p>Befeuchtung: 1- 5</p>	<p>Room temperature GoodKnight® H₂O Constant temperature</p>	<p>Verwendung</p> <p>GoodKnight® H₂O ist kompatibel mit den Geräten der:</p> <p>Produktpalette GoodKnight®</p> <p>Produktpalette EcoStar™</p>


DREAMSTAR™ ANALYZE 4.0

DreamStar™ Analyze 4.0 ist die neueste Softwaregeneraion speziell für die CPAP-Geräte der Firma SEFAM.

Damit können heute bis zu 365 Tage in den Geräten gespeicherte Detaildaten abgerufen werden. Zur einfachen und umfassenden Beurteilung der Wirksamkeit der Behandlung werden diese Daten in Form von zusammenfassenden Berichten oder Grafiken dargestellt. DreamStar™ Analyze 4.0 bietet eine Direktverbindung mit der Echtzeit-Anzeige.

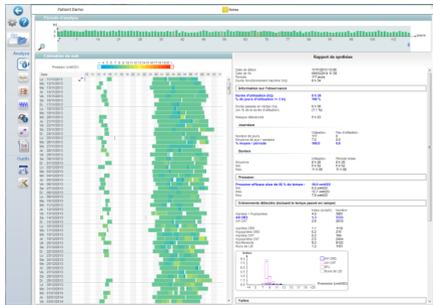

Nachtkalender

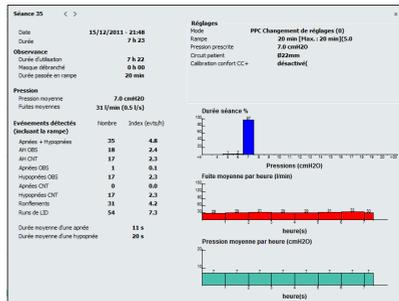

Detailaufstellung einer Sitzung



Atemflusskurve



Produktpalette EcoStar™



Eine Echte Inspiration

Eine komplette Produktpalette zur Optimierung des Behandlungskomforts und der Compliance von Patienten

K. JUNGLUTH
 Medizintechnik für's Leben
 Tel.: 052 05 - 72 999 0
[www. cpap-online.de](http://www.cpap-online.de)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an :
 customerservice@sefam-medical.com
 marketing@sefam-medical.com



EcoStar™ ist eine eingetragene Marke von SEFAM