








Ersatzteile				
Kopfbänderung CARA inkl. Bänderungsclips XS: WM 25191 Standard: WM 25192 	Kopfbänderung CARA Full Face inkl. Bänderungsclips WM 25243 	Maskenkissen CARA Gr. XS: WM 25189 Gr. S/M: WM 25238 Gr. M/L: WM 25239 	Maskenkissen CARA Full Face Gr. S: WM 25601 Gr. M: WM 25602 Gr. L: WM 25603 	Reißleine CARA Full Face WM 25623 

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.de

Technische Daten	CARA	CARA Full Face
Produktklasse nach Richtlinie 93 / 42 / EWG	II a	II a
Abmessungen (B x H x T)	72 x 112 x 70 mm (Größe XS) 72 x 117 x 70 mm (Größe S/M) 72 x 118 x 70 mm (Größe M/L)	93 mm x 145 mm x 89 mm (Größe S) 95 mm x 160 mm x 90 mm (Größe M) 95 mm x 174 mm x 91 mm (Größe L)
Gewicht	58 g (Größe XS) 59 g (Größe S/M) 60g (Größe L/M)	93 g (Größe S) 97 g (Größe M) 102 g (Größe L)
Therapiedruck	4 hPa – 30 hPa	4 hPa – 25 hPa
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)	Ø 22 mm (männl.)
Temperaturbereich		
• Betrieb:	+5 °C bis +40 °C	+5 °C bis +40 °C
• Lagerung:	-20 °C bis +70 °C	-20 °C bis +70 °C
Strömungswiderstand		
• bei 50 l/min	0,2 hPa	0,15 hPa
• bei 100 l/min	0,9 hPa	0,5 hPa
Strömungswiderstand Notfallausatemventil		
• Inspiration bei 50 l/min	–	0,6 hPa
• Expiration bei 50 l/min	–	0,8 hPa
Schalldruck Notfallausatemventil		
• Öffnen:	–	0,5 hPa
• Schließen:	–	2,2 hPa
Angegebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871:		
• Schalldruckpegel:	18 dB(A)	19 dB(A)
• Schallleistungspegel:	26 dB(A)	27 dB(A)
• Unsicherheitsfaktor:	3 dB(A)	3 dB(A)
Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹	bis zu 12 Monate ¹
Angewandte Normen	EN ISO 17510-2:2009	EN ISO 17510-2:2009

¹ Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

CE 0197

Geräte-Bezeichnung	Größe	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.	Geräte-Bezeichnung	Größe	Artikel-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
CARA Nasal	XS	WM 25590	14.24.16.2073	CARA Full Face	S	WM 25630	in Bearbeitung
CARA Nasal	S/M	WM 25600	14.24.16.2073	CARA Full Face	M	WM 25640	in Bearbeitung
CARA Nasal	M/L	WM 25610	14.24.16.2073	CARA Full Face	L	WM 25650	in Bearbeitung

Löwenstein Medical Technology
Kronsaalweg 40, 22525 Hamburg
Deutschland
T : +49 40 547 02 0
F : +49 40 547 02 461
info@loewensteinmedical.de
www.loewensteinmedical.de



© Urheberrechtlich geschützt. Vertriebfähig, jeder Art, nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical Technology. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.



NEU
CARA Full Face
CARA XS

CARA
Ausgezeichnet schlafen.





CARA Ausgezeichnet schlafen.

Perfekte Passform, hoher Tragekomfort, angenehme und leise Ausatmung und gute Hautverträglichkeit - Die Nasal- und Mund-Nasen-Masken der CARA-Familie perfektionieren diese Anforderungen auf moderne Art und Weise.

Unsere erfolgreichen CARA-Masken überzeugen durch ihre Leichtigkeit, das sich sanft anschmiegende, passgenaue Maskenkissen, die guten Einstellmöglichkeiten und weitere pfiffige Details.

Für nahezu jeden Maskenträger bietet CARA die richtige Lösung.



CARA einfach aufsetzen.



Lösen Sie beide Clips von der Maske.



Streifen Sie die Kopfbänderung über Ihren Kopf.



Befestigen Sie die Clips unten an der Maske.



Stellen Sie die oberen Kopfbänderungen so locker wie möglich, aber so fest wie nötig ein.



Stellen Sie die unteren Kopfbänderungen ebenfalls so locker wie möglich, aber so fest wie nötig ein.



Stellen Sie die Kopfbänderung auf dem Kopf so ein, dass sie unten nicht mit den Ohrfläppchen kollidieren.



Die Stirnstütze so locker wie möglich einstellen, sie muss nicht anliegen.



Unser Anwendervideo finden Sie auf YouTube.

Maskenkissen – passgenau und stabil

Der erste Eindruck stimmt. Das Maskenkissen ist weich, nachgiebig und anschmiegsam. Dennoch sitzt es stabil auf dem Gesicht und passt sich genau den jeweiligen Konturen an – optimal für einen langen Tragekomfort, sogar ganz ohne Stirnpolster.

Bewährtes perfektionieren – untastbar leise

Das spaltförmige Ausatemsystem nahe dem Kugelgelenk ist seit Jahrzehnten bewährt. Die CARA-Familie perfektioniert dieses. Weniger Teile erleichtern die Handhabung, reduzieren das Gewicht und helfen der Umwelt durch weniger Materialproduktion und -entsorgung.

Erhalten bleiben das diffuse Abströmen, um weder Patient noch Bettpartner zu stören, sowie der obere geschlossene Bereich, um keine Luft Richtung Augen strömen zu lassen.

CARA ist ausgezeichnet

CARA konnte nicht nur Sie überzeugen, sie wurde mit dem internationalen Designpreis Focus Open ausgezeichnet.

Auch das unabhängige Institut Hohenstein ist überzeugt. Nur einwandfreie Textilien ohne gesundheitsbedenkliche Substanzen erhalten das weltweit anerkannte OEKO-TEX STANDARD 100 Siegel – so auch die Kopfbänderung der CARA-Familie.



Focus Open 2018
Special Mention


BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD



Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Die Vorteile von CARA

- Weiches, anschmiegsames Maskenkissen – in 3 Größen
- Leises und diffuses Ausatemsystem **1a, 1b**
- Leichtgewicht **2**
- Farbcodierte Kopfbänderung – farbiger Bereich (petrol oder syrah) oben
- Einstellmöglichkeit des oberen Kopfbandes für einen perfekten Sitz bei jeder Kopfgröße **3**
- Wahl zwischen einfädeln oder fest montieren **4a, 4b**
- Reißleine für schnelle Demontage **5**
- Kugelgelenk mit 360° und 3D-Drehung für grenzenlose Bewegungsfreiheit **6**
- Extrem belastbares Material

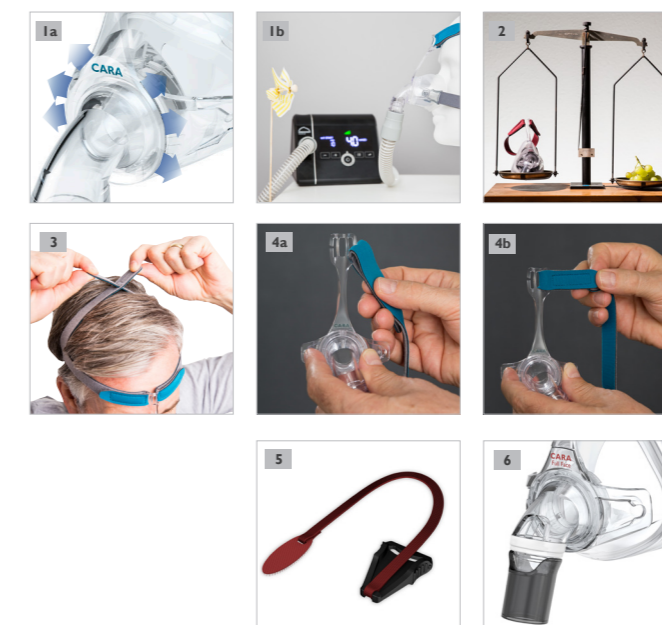

CARA - Made in Germany