




made for you!

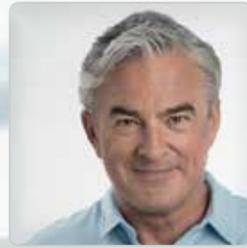

JOYCEone

JOYCEone

Ihre 1. Wahl: zeitsparend und passgenau

So schnell und bequem war Maskenanpassen noch nie: Kaum hat Ihr Patient JOYCEone aufgesetzt, ist die Anpassung auch schon erfolgreich beendet.

Um keine Gesichtsform verlegen – jahrzehntelange Maskenexpertise macht's möglich

Das Auf- und Absetzen zahlreicher Maskenvarianten sowie zeitraubendes Einstellen war gestern. Heute bieten wir Ihnen die Beatmungsmaske, die nahezu immer passt: JOYCEone, das Ergebnis jahrzehntelanger Maskenexpertise – wie für Sie gemacht.

Hand in Hand: Wohlfühlkomfort und Therapieerfolg

Dank seiner optimierten Form findet der einschichtige Maskenwulst von selbst die ideale Position – unabhängig von Nasengröße und -form. Ähnlich clever arbeitet die Stirnstütze: Ihr flexibles Federprinzip sorgt automatisch dafür, dass sie immer therapiegerecht im richtigen Abstand stabil und zugleich komfortabel an der Stirn aufliegt.

Durchdacht bis ins Detail

Ihre Patienten werden JOYCEone vom ersten Kontakt an lieben! Denn bei JOYCEone überzeugen nicht nur Passgenauigkeit und Tragekomfort: Durch die unverwechselbare Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips lässt sich JOYCEone von Anfang an schnell und korrekt montieren. Und auch die Maskenreinigung gelingt mühelos und bequem wie nie zuvor.


Moderne Effizienz

Kurz und gut: Das intelligente JOYCEone Prinzip unterstützt Sie, Ihre Zeit optimal zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Patientenversorgung machen zu müssen. JOYCEone – made for you!

Die Vorteile von JOYCEone

- Wirtschaftlich: Eine Größe passt nahezu allen Patienten
- Passgenau und zeitsparend: Automatische Anpassung von Maskenwulst 1 und Stirnstütze 3
- Unverwechselbare Montage: Eindeutige Farbcodierung von Kopfbänderung und Bänderungsclips 4
- Bequem: Mühelose Reinigung
- Angenehm: Leises Ausatemsystem 7
- Stabil: Extrem belastbare Materialien

Spürbarer Tragekomfort und überzeugende Sauberkeit: Unsere Beschichtung WEINMANN SilkTec aus Flüssigsilikonkautschuk setzt neue Maßstäbe durch eine deutlich glattere und dadurch hygienischere Oberfläche als herkömmliche Beschichtungen.

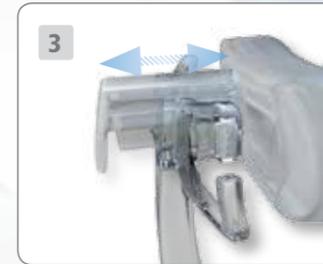

- 1 Maskenwulst
- 2 Stirnpolster
- 3 Stirnstütze
- 4 Bänderungsclip
- 5 Klettzungen
- 6 Kugelgelenk
- 7 Ausatemsystem
- 8 Druckmessanschluss

JOYCEone

WM-Nr./Hilfsmittelverzeichnis-Pos.-Nr. (Inhalations- und Atemtherapiegeräte)

Produktname	WM-Nr.	HMV-Pos.-Nr.
JOYCEone	WM 25260	in Beantragung

Ersatzteile

Kopfbänderung inkl. Bänderungsclips WM 25255 	Stirnpolster Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 26801 	Verschluss Druckmessanschluss WM 26849 
Bänderungsclips 2 Stück WM 25257 	Stirnstütze inkl. Stirnpolster, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 15907 	Drehhülse WM 26846 
Maskenwulst Silikon, Beschichtung WEINMANN SilkTec WM 25253 	Set Kugelgelenk vented Sicherungsring, Winkel, Drehhülse, Verschluss WM 15908 	Transportbeutel WM 26295 

Unser vollständiges Angebot an Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter: weinmann.de

Technische Daten JOYCEone

CE 0197 Zertifiziert nach EN ISO 13485 (EN ISO 13485)

Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG	II a	Temperaturbereich	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betrieb: +5 °C bis +40 °C ■ Lagerung: -20 °C bis +70 °C
Abmessungen (B x H x T)	ca. 96 x 115 x 83 mm	Strömungswiderstand	<ul style="list-style-type: none"> bei 50 l/min 0,05 hPa bei 100 l/min 0,28 hPa
Gewicht	87 g	Angebener Zweizahl-Geräusch-Emissionswert nach ISO 4871	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schalldruckpegel: 15 dB(A) ■ Schalleistungspegel: 23 dB(A) ■ Unsicherheitsfaktor: 3 dB(A)
Therapiedruckbereich	4 hPa bis 30 hPa	Gebrauchsdauer	bis zu 12 Monate ¹
Schlauchanschluss Konus nach EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (männl.)		
Druckmessanschluss	Ø 4 mm		

¹ Materialien, die zur Herstellung von Masken verwendet werden, altern, wenn sie z. B. aggressiven Reinigungsmitteln ausgesetzt sind. Im Einzelfall kann es daher notwendig sein, Maskenteile früher zu ersetzen.

weinmann.de | weinmann.ch | weinmann.cn | weinmann.co.il | weinmann-france.fr | weinmann.se

JOYCEone

made for you!








JOYCEone

83699-DE-08/2013 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.